

# METASYS

## GREEN&CLEAN MB

Mundspülbecken-Reiniger  
Cuspidor cleaner  
Detergente per la bacinella  
Nettoyant de chrachoir

RD-54.031/02

## GREEN&CLEAN MB


<b>DE</b>	Achtung	<b>EL</b>	Προσοχή
<b>EN</b>	Warning	<b>PL</b>	Uwaga
<b>FR</b>	Attention	<b>CS</b>	Varování
<b>IT</b>	Attenzione	<b>SK</b>	Pozor
<b>ES</b>	Atención	<b>SL</b>	Pozor
<b>PT</b>	Atenção	<b>HR</b>	Pozor
<b>NL</b>	Waarschuwing	<b>HU</b>	Figyelem
<b>SV</b>	Varning	<b>FI</b>	Hoiatus
<b>FI</b>	Varoitus	<b>LV</b>	Uzmanību
<b>NO</b>	Advarsel	<b>LT</b>	Atsargiai
<b>DA</b>	Advarsel		

Produktidentifikatoren / product identifiers:  
Laurylpyridinium chloride [104-74-5],  
Alkohol, C10-16, ethoxyliert, propoxyliert /  
alcohol, C10-16, ethoxylated, propoxylated [69227-22-1]

### e 500 ml



0408

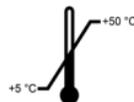

**METASYS Medizintechnik GmbH**

Florianistr. 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria  
Tel.: +43/(0)512/205420-0  
Fax: +43/(0)512/205420-7  
info@metasys.com - www.metasys.com

## **DE** GREEN&CLEAN MB

Praktischer Mundspülbecken-Bürstenreiniger auf Zitronensäure- und Enzymbasis

Löst Kalk- und Farblagerungen und besitzt ausgezeichnete Eiweißlösekraft. Ideal geeignet für sämtliche Amalgamabscheider. GREEN&CLEAN MB ist phenol- und aldehydfrei und biologisch abbaubar.

Anwendung: GREEN&CLEAN MB ist eine konzentrierte, gelbförmige Anwendungslösung und wird unverdünnt angewendet. Bürstenflasche einfach umdrehen, ohne diese zusätzlich zu drücken. Die austretende Menge reicht meist optimal aus, um die Speiseshale zu reinigen.

ACHTUNG: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Zusammensetzung: quartäre Ammoniumverbindungen, Tenside, Enzyme

## **EN** GREEN&CLEAN MB

Practical cuspidor cleaner based on citric acid and enzymes. Dissolves lime and colour sediments. Excellent protein dissolving power. Ideal for all amalgam separators (defoaming agent). GREEN&CLEAN MB is phenol und aldehyde free and biodegradable.

Application: GREEN&CLEAN MB is a concentrated gel application solution and is applied undiluted. Simply turn the brush bottle upside down without additional squeezing. The dispensed amount of gel is usually sufficient optimally to clean the cuspidor.

WARNING: Harmful if swallowed. Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. IF SWALLOWED: Call a POISON

CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

Composition: Quaternary ammonium compounds, tensides, enzymes

## **FR** GREEN&CLEAN MB

Nettoyant à brosse à base d'acide citrique et enzymatique pour le nettoyage du crachoir. GREEN&CLEAN MB enlève les dépôts calcaires et des colorants. Excellente solubilité des protéines. Idéal pour tous les séparateurs d'amalgame. GREEN&CLEAN MB est exempt de phénol et d'aldéhyde et est biodégradable.

Mode d'emploi: Le GREEN&CLEAN MB est une solution concentrée sous forme de gel qui s'utilise non diluée. Tourner le flacon, ne pas presser. La quantité qui s'écoule suffit pour un nettoyage parfait du crachoir.

ATTENTION: Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

Composition: Ammoniums quaternaires, tensides, enzymes

## **IT** GREEN&CLEAN MB

Detergente agli enzimi per la sputacchiera in soluzione concentrata pronta per l'uso dalla consistenza gel. Non occorre diluire. Scioglie incrostazioni di calcare e residui di colori. Eccezionale dissoluzione delle proteine grazie alla componente enzimatica. Ideale per tutti i separatori d'amalgama. GREEN&CLEAN MB è privo di fenoli ed aldeidi e si distingue con un'ottima ecocompatibilità.

Utilizzazione: GREEN&CLEAN MB è un gel concentrato, che è pronto all'uso. Semplicemente girare il flacone senza premerlo che fuoriesce la quantità necessaria per l'azione pulente della bacinella.

ATTENZIONE: Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori

dalla portata dei bambini. IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.

Composizione: Composti di ammonio quaternario, tensioattivi, enzimi

## **ES** GREEN&CLEAN MB

Práctico producto de limpieza para cepillos y lavabos de enjuague bucal a base de ácido cítrico y enzimas. Disuelve las incrustaciones de cal y pintura y tiene una buenisísima fuerza disolvente contra las proteínas. Ideal para todos los separadores de amalgama. GREEN&CLEAN MB no contiene fenoles ni aldehídos, y además es biodegradable.

Modo de empleo: El GREEN&CLEAN MB es una solución concentrada en forma de gel que se utiliza sin diluir. Sólo tiene que voltear el frasco; no lo presione de forma adicional. La mayoría de veces, la cantidad que salga volteando el frasco es más que suficiente para limpiar la escudilla para escupir.

ATENCIÓN: Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular grave. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si la persona se encuentra mal.

Composición: Compuestos cuaternarios de amonio, agente tensioactivo, enzimas

## **PT** GREEN&CLEAN MB

Detergente a base de ácido cítrico e enzimático para a limpeza da cuspideira. GREEN&CLEAN MB dissolve os depósitos calcários, excelente solubilidade das proteínas devido as enzimas, favorece o funcionamento duradouro de instalações e separadores de amalgama. GREEN&CLEAN MB não contém fenol nem aldeído e é biologicamente decomponível.

Modo de usar: O GREEN&CLEAN MB é uma solução concentrada em forma de gel que se aplica sem diluição. Inverter simplesmente o frasco da escova, sem pressioná-lo

adicionalmente. A quantidade derramada é geralmente suficiente e ideal para limpar a cuspideira. Virar o frasco, pressionar levemente, limpar, a cuspideira está própria.

ATENÇÃO: Nocivo por ingestão. Provoca irritação ocular grave. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.

Composição: Amónios quaternários, aditivos detergentes, enzimas

## **NL** GREEN&CLEAN MB

Praktische borstelreiniger voor spoelbak op basis van citroenzuur en enzymen. Lost kalk en kleurafzettingen op en geschikt over een uitstekende kracht om eiwitten op te lossen. Ideaal geschikt voor alle amalgaamscheiders. GREEN&CLEAN MB is vrij van fenol en aldehyde en biologisch afbreekbaar.

Gebruik: GREEN&CLEAN MB is een geconcentreerde, gelvormige gebruiksooplossing en wordt onverdund gebruikt. Borstelfless eenvoudig omdraaien, zonder deze extra in te drukken. De uitlopende hoeveelheid is meestal voldoende, om de spittoon te reinigen.

WAARSCHUWING: Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Samenstelling: Quartaire ammoniumverbindingen, oppervlakte-actieve stoffen, enzymen

## **SV** GREEN&CLEAN MB

Praktiskt munspolbäckens-borst rengörare på citronsyre- och enzymbas. Löser kalk- och färgavlagringar och har utmärkt äggvitelösningskraft. Idealisk för samtliga amalgamavskiljare. GREEN&CLEAN MB är fenol- och aldehydfri och biologiskt nedbrytbar.

Användningsrekommendation: GREEN&CLEAN MB är en koncentrerad gellösning för applicering som ska appliceras

utspädd. Vrid flaskan utan att trycka ihop den. Mängden som kommer ut räcker gott och väl för att rengöra spottkoppen.

**VARNING:** Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. **VID FÖRTÄRING:** Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. **Sammansättning:** Kvartära ammoniumföreningar, tensider, enzymer

## **FI** GREEN&CLEAN MB

Entsyymeja ja sitruunahappoa sisältävä pesuaine huuheluaaltaalle. Irottaa kalkkikertymät ja värjäytymät sekä liuottaa pois proteiinit. Ihanteellinen tuote amalgaamierottelijoille ja ilma-vesi-separaattoreille. GREEN&CLEAN MB ei sisällä fenoleja eikä aldehydejä ja se on biologisesti hajoava.

**Käyttö:** GREEN&CLEAN MB on tiivistetty geeli ja se annostellaan laimentamattomana. Käännä harjapullo ylösalaisin ilman ylimääräistä puristamista. Annosteltu määrä geeliä riittää yleensä sylkykupin puhdistukseen.

**VAROITUS:** Haitallista nieltynä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. **JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:** Ota yhteys MYRKYTYSIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/jos ilmenee pahoinvointia.

**Vaikuttavat aineet:** Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, entsyymit, pintakäsittelyaineet

## **NO** GREEN&CLEAN MB

Praktisk munnspylebekken-børsterengjører basert på sitronsyre og ensymer. Leser opp kalk- og fargebelegg og har utmerkede egenskaper for oppløsning av eggehvite. Ideell for alle samtlige amalgamkuttere. GREEN&CLEAN MB er phenol- und aldehydfritt og biologisk nedbrytbart.

**Bruk:** GREEN&CLEAN MB er en konsentrert, geleglignende bruksløsning og påføres uforynnet. Snu børsteflasken uten å trykke den. Mengden som kommer ut er i regel optimal for å rengjøre spytebakken.

**ADVARSEL:** Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. **VED SVELGING:** Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

**Sammensetning:** Kvartære ammoniumforbindelser, tensider, enzymer

## **DA** GREEN&CLEAN MB

Praktisk børstedispenser baseret på citronsyre og enzymer til optimal rengøring af spyttbakke. Opløser kalk- og farveaflejringer fremragende proteinopløsende effekt med enzymer. Ideelt produkt til alle amalgam-separatorer (skumdæpende middel). GREEN&CLEAN MB er fenol- og aldehydfrf og biologisk nedbrydelig.

**Ansøgning:** GREEN&CLEAN MB er en koncentreret gelformet anvendelsesopløsning og anvendes uforyndet. Man drejer blot børsteflasken uden at trykke på den. Den udløbende mængde er som regel optimal til rengøring af spyttbakken.

**ADVARSEL:** Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgængeligt for barn. **I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:** I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge.

**Sammensætning:** Kvaternære ammoniumforbindelser, tensider, enzymer

## **EL** GREEN&CLEAN MB

Πρακτικό καθαριστικό με βουρτσάκι για το πτελοδοχείο, σε βάση κητρικού οξέος και ενζύμων. Διαλύει άλατα και χρωματικά υπολείμματα και διαθέτει εξαιρετική πρωτεϊνολυτική δράση. Ιδανικό για όλους τους διαχωριστές αμαλγάματος. ΤΟ GREEN&CLEAN MB δεν περιέχει φαινόλες ούτε αλδεϋδες και είναι βιοδιασπώμενο.

**Χρήση:** Το GREEN&CLEAN MB είναι ένα συμπυκνωμένο, έτοιμο προς χρήση διάλυμα τύπου γέλης και χρησιμοποιείται χωρίς αραιώση. Αναποδογυρίστε απλώς τη φιάλη με βούρτσα,

χωρίς να την πιέξετε επιπρόσθετα. Η εξερχόμενη ποσότητα είναι συνήθως αρκετή για τον καθαρισμό του πτελοδοχείου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Σύσταση: τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου, επιφανειοδραστικά, ένζυμα

## **PL** GREEN&CLEAN MB

Praktyczny środek do czyszczenia miski spluwaczki oraz szczotek na bazie kwasu cytrynowego i enzymów. Likwiduje osady wapnia i przebarwienia oraz doskonale usuwa białka. Idealnie nadaje się do wszelkich separatorów amalgamatu. GREEN&CLEAN MB nie zawiera fenolu oraz aldehydu i ulega biodegradacji.

**Stosowanie:** GREEN&CLEAN MB jest skoncentrowanym roztworem użytkowym o konsystencji żelu do stosowania w postaci nierozcieńczonej. Butelkę z pędzlem odwrócić do góry dnem, nie naciskać. Wypływająca ilość roztworu wystarczy optymalnie do wyczyszczenia spluwaczki.

**UWAGA:** Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI/lekarzem.

**Skład:** poczwórne związki amonu, środki powierzchniowo czynne, enzymy

## **CS** GREEN&CLEAN MB

Praktický čistič na čistení misek na vyplachování úst kartáčem na bázi kyseliny citrónové a enzymů. Rozpouští vápenné a barevné usazeniny a má vynikající schopnost rozpouštět bílkoviny. Ideálně vhodný pro všechny odlučovače alagámu. GREEN&CLEAN MB neobsahuje aldehydy a fenoly a je biologicky odbouratelný.

**Použití:** GREEN&CLEAN MB je koncentrovaný gelový roztok, který se aplikuje v neředěné formě. Láhev stačí jednoduše otočit, aniž byste ji museli mačkat. Vystupující množství většinou zcela stačí na vyčištění plivátka.

**VAROVÁNÍ:** Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. **PŘI POŽITÍ:** Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

**Složení:** kvartérní sloučeniny amonia, tenzidy, enzymy

## **SK** GREEN&CLEAN MB

Praktický čistič umývadiel na vyplachovanie úst a kefiiek na báze kyseliny citrónovej a enzýmov. Rozpúšťa usadeniny vápna a farieb a má vynikajúcu bieliacu silu. Ideálne prispôsobený pre všetky amalgámové separátory. GREEN&CLEAN MB neobsahuje fenoly a aldehydy a je biologicky odbúrateľný.

**Použitie:** GREEN&CLEAN MB je koncentrovaný gél a používa sa neriedený. Jednoducho otočte flaštičku s kefkou hore dnom bez ďalšieho stláčania. Takto získané množstvo gélu je zvyčajne dostačujúce pre optimálne čistenie pľuvadla. Bezpečnostné odporúčanie: Držte mimo dosahu detí. Pri kontakte s očami dôkladne vypláchnite prúdom tečúcej vody a konzultujte s lekárom.

**POZOR:** Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. **PO POŽITÍ:** Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

**Zloženie:** kvartérne amóniové zlúčeniny, tenzidy, enzymy.

## **SL** GREEN&CLEAN MB

Praktično čistilno sredstvo za pljuvalnike in ščetke na osnovi citronske kisline in encimov. Odstrani odlaganje kalcija in barve

ter izvrstno raztopi beljakovine. Primerno za vse separatorje amalgama. GREEN&CLEAN MB ne vsebuje fenola in aldehida in je biološko razgradljiv.

Uporaba: GREEN&CLEAN MB je koncentrirana raztopina, ki tvori gel in se uporablja v nerazredčeni obliki. Stekleničko s krtačko enostavno obrnite, ne da bi jo pritiskali. Iztekajoča količina je običajno optimalna za čiščenje pljuvalnika.

**POZOR:** Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hudo draženje oči. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosegá otrok. **PRI ZAUŽITJU:** Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

Sestava: Kvarterne amonijeve spojine, tenzidi, encimi.

## **HR** GREEN&CLEAN MB

Praktična četkica za čiščenje usne šupljine na osnovi limunske kiseline in encima. Otapa naslage kamenca i boje i posjeduje izvrsnu moć otapanja bjelanchevina. Idealno prikladno za sve separatore od amalgama. GREEN&CLEAN MB je bez fenola i aldehida i biološki je razgradiv.

Primjena: GREEN&CLEAN MB koncentrirana je želatinozna otopina koja se rabi nerazrijeđena. Bočicu jednostavno okrenite i pritom je ne pritišćite. Količina koja pritom iscuri uglavnom je optimalno dostatna za čiščenje usne šupljine.

**POZOR:** Štetno ako se proguta. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. **AKO SE PROGUTA:** u slučaju zdravstvenih tegoba nazvat CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Sastav: Amonijevi spojevi, tenzidi, enzimi

## **HU** GREEN&CLEAN MB

Praktikus, kétféle ellátott, enzim- és citromsav bázisú köpöcsészes tisztító. Oldja a mészlerakódásokat és az elszíneződéseket, kiváló fehérjeoldó-képességgel rendelkezik. Ideálisan használható bármely amalgámszeparátorhoz. GREEN&CLEAN MB fenol- és

aldehidmentes, biológiaiilag lebonló.

Alkalmazás: A GREEN&CLEAN MB egy koncentrált, gél formájú oldat és hígítás nélkül használható. A kefése palackot egyszerűen forgassa meg anélkül, hogy megnyomná. A kilépő mennyiség többnyire optimális an elegendő a fogászati köpöcsészes tisztítására.

**FIGYELEM:** Lenyelve ártalmas. Súlyos szemirritációt okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. **NYELÉS ESETÉN:** Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

Összetétel: Négyes ammóniumkötések, tenzidek, enzimek

## **ET** GREEN&CLEAN MB

Sidrunhappel ja ensüümidel põhinev süljekausi puhastusvahend. Lahustab katlakivi ja värvsette ning on ülitugev vahend proteiinide vastu. Ideaalne vahend kõikide amalgaami separaatorite puhastamiseks. GREEN&CLEAN MB on fenooli- ja aldehüüdiva ning bioloogune vahend.

Kasutamise: GREEN&CLEAN MB on kontsentreeritud geelilaadne kasutuslahus ja seda kasutatakse lahjendamata kujul. Lihtsalt pöõra pudel ümber. Pole vajalik pudeli pigistamine. Väljavoolav kogus on tavaliselt piisav selleks, et puhastada süljekausis täielikult.

**HOIATUS:** Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Arsti poole pöõrdudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. **ALLANEELAMISE KORRAL:** halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

Koostis: Kvatemaarse ammoniumi ühendid, ensüümid.

## **LV** GREEN&CLEAN MB

Praktisks līdzeklis spļautuves tīrīšanai uz citronskābes un enzīmu bāzes. Šķīdina kaļķa nogulsnes un pārkārojumus. Īpaši spēcīgi iedarbojas uz proteīniem. Ideāli piemērots darbā ar amalgaamas separatoriem. GREEN&CLEAN MB nesatur fenolu un aldehīdus.

Biologiškai noardās.

Lietošana: GREEN&CLEAN MB ir koncentrēts, gēlveida lietošanas šķīdums, un to lieto neatšķaidītā veidā. Vienkārši apgrieziet pudelīti ar suku, to papildus nesaspiežot. Izplūstošais daudzums lielākoties ir optimāli pietiekams, lai notīrītu spļaujamtrauku.

UZMANĪBU: Kaitīgs, ja norij. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. NORĪŠANAS GADĪJUM: Sazinieties ar SAINDĒŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

Sastāvs: Kvartārā amonija savienojumi, tensīdi, enzīmi

## **LT** GREEN&CLEAN MB

Spjaudyklēs valīklis su enzīmais, išleidzīamas koncentruto gēlio konsistencijos. Į sudētį įeinanti nedidelēs koncentracijos natūrali citrinos rūgštis ištirpdo kalkines nuosēdas ir apsaugo nuo jų susidarymo. Specialus putojimą stabdantis priedas užtikrina nepertraukiamą amalgamos separatorių veikimą. GREEN&CLEAN MB yra biologiškai suderinama medžiaga, į kurios sudėtį neįeina fenoliai ir aldehidai.

Naudojimas: GREEN&CLEAN MB yra koncentruotas gēlis, kurio nereikia skiesti. Butelį su prisuktu šepėčiu reikia tik apverstį be papildomo suspaudimo. Ištekėjusio gēlio kiekio paprastai pakanka spjaudyklės išvalymui.

ATSARGIAI: Kenksminga prarijus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĒS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. Sudėtis: Ketuvalentės amonio druskos, tenzidai, enzīmai.

# Visit us at:



[www.metasys.com](http://www.metasys.com)



[www.facebook.com/METASYSMedizintechnik](http://www.facebook.com/METASYSMedizintechnik)



[www.linkedin.com/company/metasys-medizintechnik-gmbh](http://www.linkedin.com/company/metasys-medizintechnik-gmbh)



[www.youtube.com/user/METASYSMedizintech](http://www.youtube.com/user/METASYSMedizintech)