

	작성	검토	승인
결 재			
	11/8	//	

**VERICOM**  
Making the World Smile

# Well-Root™ ST

Sealer pro plnění kořenového kanálku



Návod na použití

## ■ Jen pro dentální použití

CE  
0120

**VERICOM CO., LTD.**

### Dental Materials

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea  
vericom@vericom.co.kr overseas@vericomdental.com  
www.vericom.co.kr

© VERICOM 2016. All rights reserved.

CZ

## Popis

Well-Root™ ST je vhodně namíchaný materiál připravený ihned k použití, vstřikovatelná bioaktivní kalcium-silikátová pasta vyvinutá jako trvalá výplň kořenového kanálku. Well-Root™ ST je založená na kalcium-silikátové bázi, která pro vytvrzení vyžaduje přítomnost vody.

Well-Root™ ST nekondenzuje během tvrdnutí a disponuje výbornými fyzikálními vlastnostmi.

## Čas vytvrzení

Čas tuhnutí je 25min. měřené podle ISO6876:2012 (100% vlhost). Nicméně v přirozeném kanálku může být čas tuhnutí i více než 2,5h.

## Složení

- Kalcium-silikátová směs
- Zirkon oxid
- Plnivo a thickening agent

## Užití

Trvalý kořenový výplňový materiál.

## Doporučený postup

1. Vypreparuj a vyplachuj kořenový kanálek pomocí standardních endodontických technik.
2. Pro jednodušší práci si připevňte přiložené rozšiřující držátko na stříkačku, jako je ukázáno na obrázku níže.



3. Sundejte krytku ze stříkačky Well-Root™ ST. Bezpečně nasadte jednorázovou koncovku na tělo stříkačky pomocí rotace po směru hodinových ručiček. Jednorázové koncovky jsou flexibilní a mohou být ohnuty pro jednodušší přístup do kořenového kanálku.
4. Vlož koncovku nasazenou na stříkačce maximálně do koronární 1/3 kořenového kanálku, ne hlouběji. Jemně a plynule vytlačte Well-Root™ ST po apex kořenového kanálku. Ke kontrole správného zaplnění apikální oblasti si můžete v této fázi zhotovit RVG. Pokud je vyplnění materiálem nedostatečné, vypláchněte Well-Root™ ST ven z kanálku a opakujte postup.
5. Pokračujte s vyplněním kořenového kanálku pomocí Well-Root™ ST za současného vytahování koncovky z kořenového kanálku. Vyplňte kompletně kořenový kanálek. Vyhněte se vytvoření vzduchových bublin nebo přeplnění kořenového kanálku.
6. Odstraňte přebytky Well-Root™ ST z horní části kořenového kanálku pomocí vlhké bavlněné peletky.
7. Aplikuj gutaperčovú cep do korenového kanálku za pomoci standardních endodontických technik.


## Skladování

1. Dostatečně utáhněte krytku na stříkačce v době skladování Well-Root™ ST.
2. Vyhněte se expozici na přímém slunci.
3. Uchovávejte v chladu.

## Varování

1. Pro dentální použití
2. Měl by být používán jen zubními lékaři a odbornými stomatologickými pracovníky a to dle výrobcem doporučených postupů a varování.
3. Uchovávej mimo dosah nestomatologických pracovníků zvláště dětí, starších pacientů a dalších.
4. Netlačte pastu Well-Root™ ST do kanálku příliš velkou silou, jelikož může pacient pocítit akutní bolest.
5. Nepřepněte materiál přes apex.
6. V případě nehody a zasažení očí okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody.
7. Kořenový kanálek nesmí být vyplněn jenom pomocí Well-Root™ ST.
8. Nepoužívejte znovu jednorázové koncovky.
9. Nepoužívejte po vypršení expirace.
10. Nepoužívejte vnitřně.

## Symbols

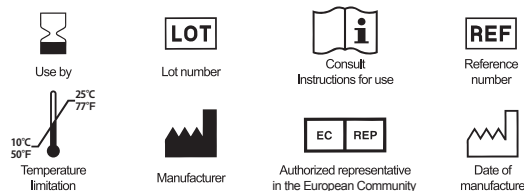

## Záruka

V případě vady výrobku lze na výrobci VERICOM CO., LTD. nárokovat jeho výměnu. VERICOM CO., LTD. nenes odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu, způsobenou nedodržením návodu k použití, nesprávnou manipulací s výrobkem či použitím k jinému než doporučenému účelu. Před použitím produktů se každý uživatel musí ujistit, že je výrobek vhodný pro daný případ. Uživatel přebírá veškerou odpovědnost za užívání výrobku a za případné škody způsobené jeho vinou.



## VERICOM CO., LTD.

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea  
Tel +82-31-441-2881 Fax +82-31-441-2883  
E-mail vericom@vericom.co.kr overseas@vericomdental.com  
Homepage www.vericom.co.kr

European Representative (Koo Kyo-Chan)  
3 Rue Rosiers 92340 Bourg la Reine France  
E-mail kdescartes@vericom.co.kr

VERICOM USA, INC.  
2670 Walnut Ave., Suite K, Tustin, CA 92780 USA  
Tel +1-714-508-9462 Fax +1-714-508-9363