

Znásobte své schopnosti s energií Sonic

Užijte si sílu výplní SonicFill™3!



SonicFill™3

Kompozitní systém SingleFill™

Krok 1 Naneste výplň SonicFill™3 a vytvarujte.
Krok 2 Žádný druhý krok není.

Představujeme vám nový, pokročilý kompozitní systém SonicFill 3 SingleFill™.

Je to první zvukem aktivovaný kompozitní systém nanášený v jedné vrstvě (bulkfill), který v porovnání s technikou postupného vrstvení umožňuje jednodušší a rychlejší provádění kvalitních výplní. Dosáhnete trvalých výplní v jednom efektivním kroku.

KAVO  **Kerr**

Vychází ze 125 let zkušeností

Systém SonicFill společnosti Kerr umožnil v posledních 10 letech tisícům lékařů po celém světě provádět kvalitní distální výplně snadno použitelným, jednovrstvým (SingleFill) postupem, který kombinuje výhody tekutého a tvarovatelného kompozitu.


Klíčem k úspěchu je jedinečná, zvukem aktivovaná technologie, která kombinuje exkluzivní znalosti o materiálech společnosti Kerr s inovativním využitím zvukové energie, která vychází z know-how společnosti KaVo získaného při výrobě násadců. Výsledkem je revoluční produkt, který pomáhá lékařům zkracovat dobu ošetření a současně zlepšuje klinické výsledky a zkušenosti pacientů.



Jedinečná patentová technologie


Tajemství systému SonicFill spočívá v patentované pryskyřici s vysokou hustotou a speciálními modifikátory, které reagují na zvukovou energii aplikovanou přes násadec.

Při použití zvukové energie klesne viskozita (až o 84 %), což umožňuje rychlé umístění a přesné přizpůsobení stěnám kavity. Jakmile přestane zvuková energie působit, kompozit se vrací do viskóznějšího, nestékavého stavu, který je ideální pro modelování a konturování.

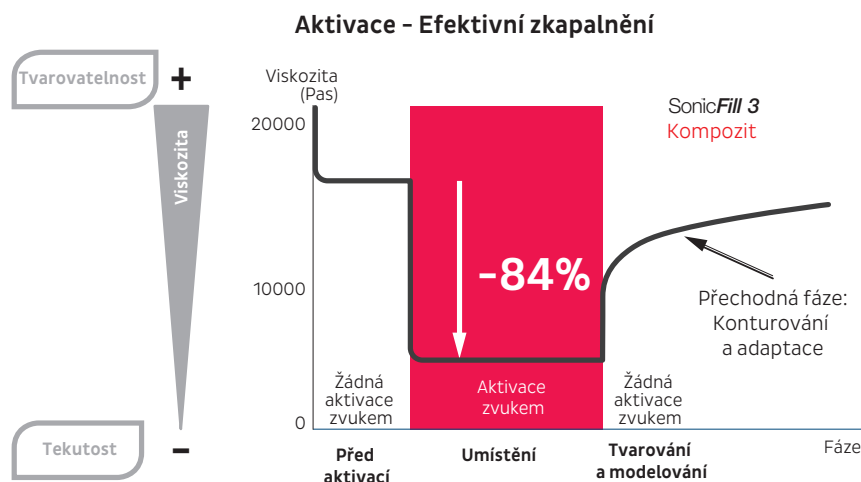

Ty největší výhody tekutého a tvarovatelného kompozitu v jednom

Nový SonicFill™ 3 je jediným zvukem aktivovaným kompozitem, který se nanáší v jedné vrstvě (bulk fill) a chová se jako tekutý, pokud jde o přizpůsobení se a rychlé umístění, ale také jako tvarovatelný kompozit, pokud jde o modelování a konturování.

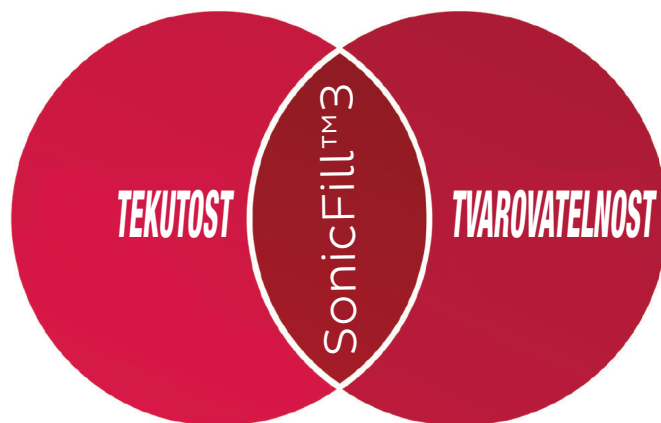

Největší výhody TEKUTÉHO kompozitu


- Vylepšené přizpůsobení vnitřní stěnám a okrajům
- Rychlé umístění
- Nízké smršťovací napětí

Největší výhody TVAROVATELNÉHO kompozitu

- Vylepšená manipulace a snadné leštění
- Výjimečné mechanické vlastnosti
- Není nutný žádný liner ani krycí vrstva

Méně kroků znamená menší šanci udělat chybu


System SonicFill™ 3 nahrazuje tradiční, časově náročné vícefázové techniky vrstvení kompozitu kompozitním systémem SingleFill™, který eliminuje potřebu použití lineru nebo horní krycí vrstvy.

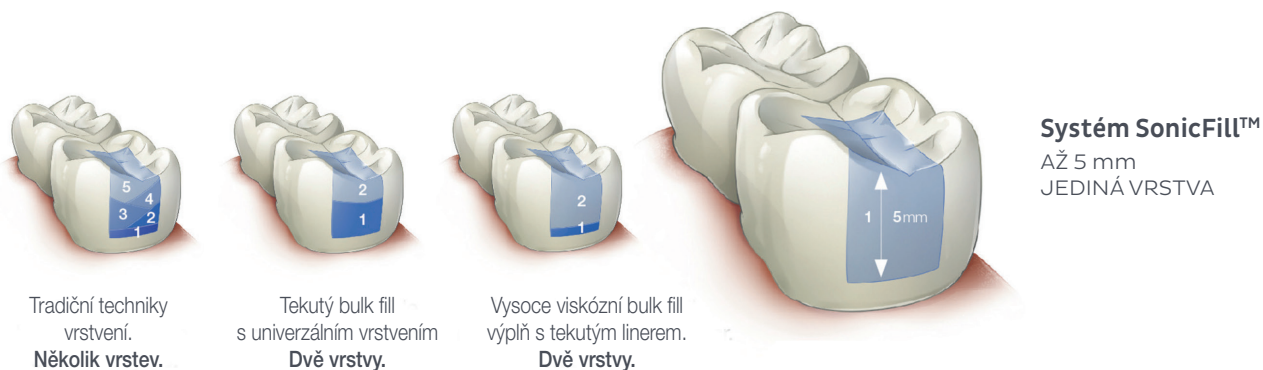

Prokázané výsledky. O krok dál než ostatní

Napětí při smršťování


Výplň SonicFill™ 3 má menší napětí při smršťování než produkty Filtek™ One Bulk Fill a Tetric EvoCeram®.*

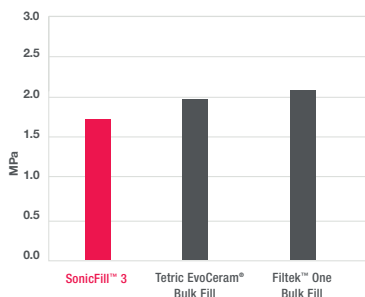

*Smršťovací napětí za 2 minuty


Pevnost v ohybu

Výplň SonicFill™ 3 má vyšší pevnost v ohybu než produkty SDR® Flow+ a Tetric EvoCeram® Bulk Fill.*

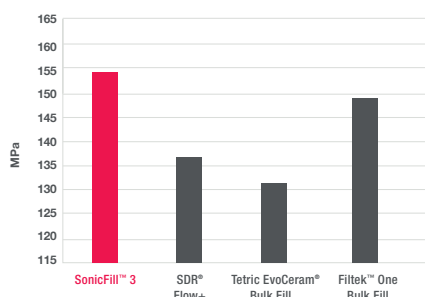

Stupeň přeměny

Ve vrstvě 5 mm vykazovala výplň SonicFill™ 3 ve spodní části tvrdost 86,6 % v porovnání s horní částí.*

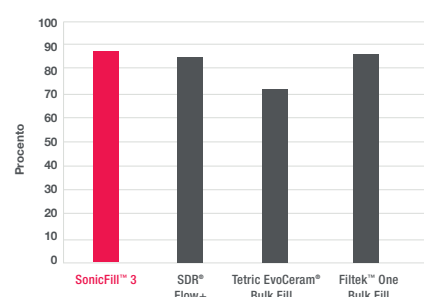

* Interní testovací data společnosti Kerr
Soubor s daty je k dispozici na vyžádání

Kvalitní výplně, které odolají zubu času, v kratší době


Provádění dlouhodobých výplní nebylo nikdy snazší ani efektivnější. Nová pokročilá výplň SonicFill™3 s vylepšeným přizpůsobením již pomáhá stomatologům provádět výplně snáze, s větší přesností a s mnohem předvídatelnějšími a spolehlivějšími výsledky.

Výplň SonicFill™3 je určena k přímému umístění do všech tříd kavity na předních i zadních zubech. Je určena také k drobným okluzním rekonstrukcím a výplním jádra (úplný seznam určení naleznete v návodu k použití).

Náhrada starého amalgamu za produkt SF3



Hluboké a rozsáhlé výplně třídy II s produktem SF3

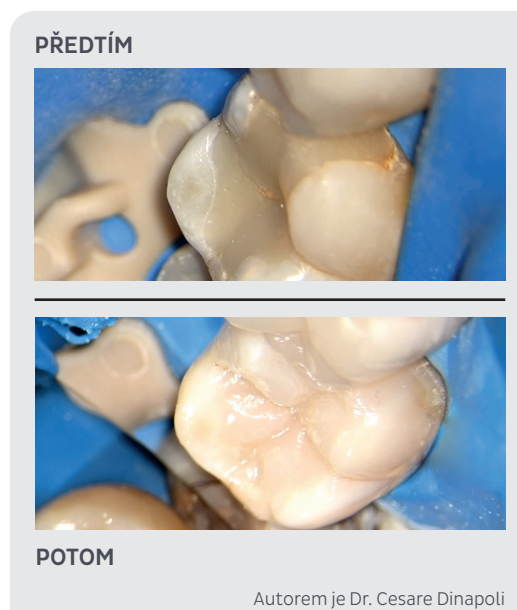

Využijte efektivitu výplní SonicFill™ 3! V efektivitě o 3 kroky napřed

Kompozitní systém nanášený v jedné vrstvě SonicFill™ 3 mění únavné, opakované distální výplně na snadné a spolehlivé jednovrstvé umístění. Nová pokročilá výplň SonicFill™ 3 nanášená v jedné vrstvě nabízí v porovnání se svými předchůdci **lepší přizpůsobení**, ještě **jednodušší manipulaci a tvarování** a současně také **snazší vytlačování při umístění**. A konečnou výhodou jsou rychlejší ošetření pacientů, předvídatelnější výsledky a spolehlivé dlouhodobé výplně.


1

**PRACUJTE
S JISTOTOU**



Jistota provedení

Dramatická reakce na zvukovou energii aplikovanou pomocí speciálního násadce značky KaVo snižuje viskozitu nanohybridního kompozitu značky Kerr až o 84 %. To umožňuje bezvadné přizpůsobení pro spolehlivé a předvídatelné výplně.

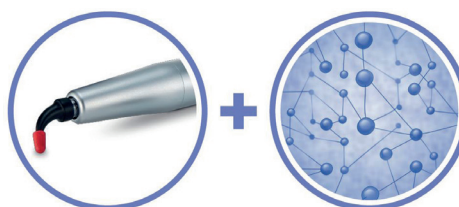

2

**PRACUJTE
RYCHLE**



Kratší postup

Výplň SonicFill 3 mění únavné, opakované distální výplně na snadné a spolehlivé jednovrstvé umístění: vyplnění kavit do hloubky až 5 mm v jednom kroku, jedním materiálem – a bez lineru nebo krycí vrstvy. Ergonomické hroty umožňují snadný přístup k dutině.



3


**PRACUJTE
BEZPEČNĚ**



Trvalá efektivita

Vysoká hustota plnění (81 % hmotnosti).

Menší napětí při smršťování umožňuje vynikající okrajovou neporušenost, minimalizuje vznik dutin a mezer v kompozitu; kromě vynikajících mechanických vlastností, jako je výborná odolnost proti opotřebení a vysoká pevnost v ohybu, zajišťuje dlouhodobou pevnost a trvanlivost.

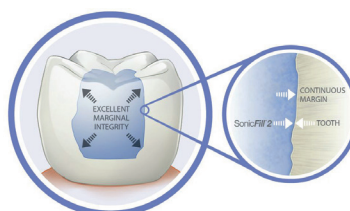

Zůstaňte v obraze

Univerzální produkty, všestranná komunikace. Máte řadu možností, jak zůstat v kontaktu se společností Kerr Dental a dostávat novinky a zprávy o nejnovějším vývoji.



Spojte se s námi

Přes naše kanály na sociálních médiích



Dostávejte novinky

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje



Ozvěte se

Prostřednictvím našich místních zástupců



Objevte, co je nového

Navštivte naše webové stránky

Vyzkoušejte si jednovrstvý kompozitní systém SonicFill™3 ve své praxi

Informace pro objednání

SonicFill™3 Intro Kit

Intro Kit je ideálním způsobem, jak se seznámit s výplní SonicFill 3. Obsahuje násadec SonicFill, „startovací sadu“, průvodce technikami a celkem 60 dávkovacích hrotů: 30 x A3, 20 x A2 a 10 x A1.

36715 Intro Kit SonicFill™3

SonicFill™3 unidose refilly

Každá unidóza obsahuje 20 dávkovacích hrotů po 0,25 g

36711 SonicFill™3 kompozit A1

36712 SonicFill™3 kompozit A2

36713 SonicFill™3 kompozit A3

36714 SonicFill™3 kompozit B1

Násadec a příslušenství

1.007.7400 Násadec SonicFill™

0.553.1210 Rychlospojka MultiFlex 457

