



Prevence

UltraSeal XT plus • PrimaDry • Zubní kartáčky Opalescence • Opalpix

Opalescence bělicí zubní pasta • Flor-Opal Varnish bílý • Universal Dentin Sealant • Ultrapro Tx profylaktická lešticí pasta



Alpský kosatec ve Wasatch Range

autor: Jeff Smith

UltraSeal XT® plus

PEČETIDLO FISUR



- Rychlé a spolehlivé pečtidlo na fisury
- Silné a odolné proti opotřebení
- Tixotropní – zatéká do fisur a prohlubní; nestéká po nanesení^{1, 2}
- Radiopákní, propustné pro fluoridy, dostupné ve 4 odstínech

Co chtějí děti: **Ať je to rychle!** Co chtějí jejich rodiče: **Ať to vydrží!**

UltraSeal XT plus Vám pomůže dosáhnout obojího - díky pohodlnému nanášení ze stříkačky a optimálnímu složení materiálu s vysokým obsahem plniva.

Ideální viskozita: Ultra Seal XT plus je zatékavý při aplikaci kanylou Inspiral Brush, ale pevný po nanesení. Na rozdíl od běžných kanyl, nanesení materiálu kanylou Inspiral Brush do fisur zabraňuje vzniku vzduchových bublin. Naplnění z 58% poskytuje zvýšenou stabilitu a odolnost proti abrazi. Použijte PrimaDry (viz odstavec níže) jako přípravný úkon, který z fisury odstraní veškerou zbytkovou vlhkost a umožní perfektní penetraci UltraSeal XT plus.³



Hluboké, rizikové rýhy a časně léze.



Kvalitní pečetení. Ohromná služba pro pacienty každého věku.




Ultra-Etch 15 sekund, opláchněte.



Osušte vzduchem a naneste PrimaDry.



UltraSeal XT plus.

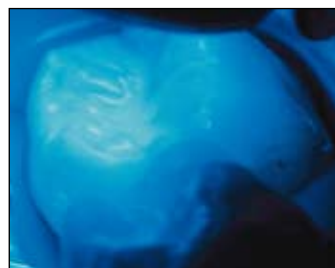

Polymerujte lampou 20 sekund.

! Použití PrimaDry ve fisurách po sušení fisur vzduchem těsně před nanesením pryskyřice významně zvyšuje penetraci pečtidla: odstraní veškerou zbytkovou vlhkost z fisur a podporuje smáčení fisur pečtidlem.

Velmi užitečné je také použití PrimaDry před opravou kompozitních výplní: odstraní vlhkost z již existující kompozitní výplně, což vede k výrazně pevnějšímu bondu s nově nanesenou kompozitní vrstvou.

Nepoužívejte PrimaDry na dentin. PrimaDry je vysoce hygroskopický a mohl by vysušit vlhkost z dentinových tubulů, což by mohlo zapříčinit bolest a diskomfort pacienta. V takových případech by měl být místo PrimaDry použit k ošetření Bondovací Systém Peak.

¹ Boksmán L, Carson B. A two-year retention and caries rate of UltraSeal XT and Fluorshield light-cured pit and fissure sealants. Gen Dent 1998 March-April; 46(2): 184-187 (Lit # 42).
² Dickinson GL. Microleakage evaluation of UltraSeal XT pit and fissure sealant with PrimaDry drying agent. Department of Restorative Dentistry, Medical College of Georgia, December, 1992. (Lit #21).
³ Adams TJ, Frazier KB, Browning WD. Effect of drying agent use on sealant penetration. (Abstract #363) J Dent Res 2000;79:189. (Lit # 64).

UltraSeal XT® plus

PEČETIDLO FISUR

Sofistikovaný systém nanášení



Tixotropní UltraSeal XT plus při průtoku spirálou kanyly Inspiral Brush řídne a tuhne po nanesení.

První vrstva v kavitě



UltraSeal XT plus zaplní všechny kouty a úhly kavity - ideální preparace před plněním kavity kondenzovatelným kompozitem.

Malé opravy I třídy



Opravy malých kavit I. třídy pomocí UltraSeal XT plus po naleptání a bondování. Zvyšuje stabilitu díky vysokému obsahu plniva.

UltraSeal XT plus Kit

1 x 1,2 ml (2,04 g) UltraSeal XT plus,
1 x 1,2 ml (1,58 g) Ultra-Etch, 2 x 1,2 ml (0,95 g) PrimaDry,
20 kanyl Inspiral Brush, 20 kanyl Blue Micro

Opákní bílá	Čirá	A1	A2
5007OW	5007CL	5007A1	5007A2

UltraSeal XT plus Refill

4 x 1,2 ml (2,04 g) UltraSeal XT plus

Opákní bílá	Čirá	A1	A2
5005OW	5005CL	5005A1	5005A2

UltraSeal XT plus Econo-Refill

20 x 1,2 ml (2,04 g) UltraSeal XT plus

Opákní bílá
500727

EXPIRACE: 24 MĚSÍCŮ Uchovávejte v chladničce.



K aplikacím objednejte:

kanyla Blue Micro, kanyla Inspiral Brush

Spolehlivé a rychlé pečetění fisur ve třech krocích



1. Naleptejte fisury pomocí Ultra-Etch



2. Vysušte/ naneste PrimaDry



3. Zapečete s UltraSeal XT plus



! UltraSeal XT plus je kompozit s nejvyšší zatékavostí (CRA Newsletter, Červen 2006, testováno 40 tekoucích komposit)

500716 PrimaDry Refill

4 x 1,2 ml (0,95 g) PrimaDry

500717 PrimaDry Econo Refill

20 x 1,2 ml (0,95 g) PrimaDry

EXPIRACE: 24 MĚSÍCŮ
Uchovávejte v chladničce.



K aplikacím objednejte:

kanyly Blue Micro



PrimaDry

K optimálnímu vysušení fisur a přípravě k pečetění (viz také vysvětlení na str. 26). PrimaDry obsahuje 99% organických rozpouštědel a 1% primeru. Proto PrimaDry rapidně odpařuje vlhkost nacházející se ve fisurách po oplachu leptadla vodním sprejem a sušením vzduchem. Ultrajemný film vytvořený primerem působí jako zvlhčující činidlo a dovoluje UltraSeal XT plus perfektně zatéct do každé fisury. Rovněž užitečný před nanesením opravy kompozita. Nepoužívejte na dentin.

Kartáčky Opalescence® Smilebrush



- Jemně čistí zuby a gingivu
- Výborný přístup i na obtížně dosažitelné plochy
- Měkké, zakulacené štětiny
- Ergonomická rukojeť, pružný krček
- Dostupné v modré, zelené a růžové barvě

505850 Kartáčky Opalescence Smilebrush
Balení 12 ks (4 od každé barvy)

Kartáčky Opalescence® Oral Hygiene

Novinka



- Účinné odstranění plaku a bakterií
- Integrované čištění jazyka
- Jemně čistí zuby a gingivu
- Pohodlný úchop
- Dostupné v modré, červené, fialové a zelené barvě

505858 Kartáčky Opalescence Oral Hygiene
Balení 12 ks (3 od každé barvy)

Kartáčky Opalescence® dětské

Novinka



- Odpružená hlavička
- Jemně čistí zuby a gingivu
- Dlouhá rukojeť, která se snadno drží
- Hravé barvy a obrázky
- Dostupné v modré, zelené a červené barvě

505855 Kartáčky Opalescence dětské
Balení 12 ks (4 od každé barvy)

Kartáčky UltraSeal dětské

Novinka



- Odpružená hlavička
- Jemně čistí zuby a gingivu
- Dlouhá rukojeť, která se snadno drží
- Speciální design s figurkou UltraSeal
- Děti si jej zamilují

505854 Kartáčky UltraSeal dětské
Balení 12 ks

Opalpix™



Skutečná velikost



- Neštípou se a nezlomí
- Texturovaný povrch - lépe čistí
- Perfektně vyvážená pružnost a pevnost
- Masíruje interproximální tkáň a současně odstraňuje plak a nečistoty


506600 Opalpix
32 ks

Bělící zubní pasta Opalescence®¹

- Účinné, rychlé uvolňování fluoridů
- Vysoká absorpce fluoridů sklovinou²
- Maximální ochrana výplní v dentinu a sklovině³
- Chrání zuby před skvrnami a zabarvením po bělení s Opalescence PF
- Svěží příchut' máty

Zubní pasta Opalescence je vynikající pro pacienty, kteří si chtějí dlouhodobě udržet odstín svých vybělených zubů. Svěží příchut' a unikátní složení maximalizují absorpci fluoridů do skloviny a současně odstraňují povrchové zabarvení při nejnižší možné úrovni abrazie.

Zubní pasta Opalescence obsahuje 0,25% fluoridu sodného (odpovídá cca. 1100 ppm fluoridových iontů). Odstraňuje povrchové zabarvení a zesvětlí odstín zubů o 2 odstíny již po 1 měsíci používání!⁴
Redukuje gíngivitidu!⁵

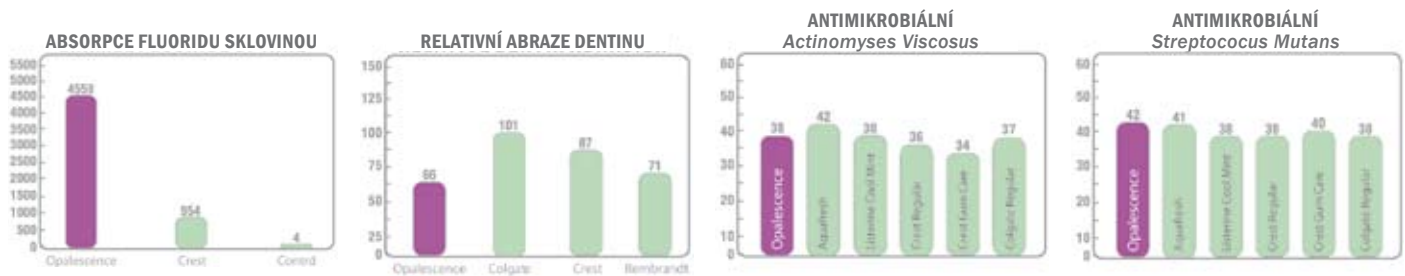

Studie absorpce fluoridu sklovinou demonstruje, že Opalescence umožňuje cca 4,8 x větší absorpci fluoridu do skloviny ve srovnání s několika známými značkami.²

Žádná jiná "bělicí" zubní pasta nemá nižší abrazi než Opalescence.³

Relativní antimikrobiální aktivita Opalescence ve srovnání se známými značkami.

- * Kontrola sestávající ze složení Opalescence. Bez dalších fluoridových aditiv.
- ** Použitá testovací procedura byla identická s procedurou definovanou jako Procedura 40 v FDA Monograph.

500401 Bělící pasta Opalescence
100 ml (128,10 g)

500402 Bělící pasta Opalescence
25 ml (32,03 g)

EXPIRACE: 24 MĚSÍCŮ



¹ This toothpaste does not contain peroxide.

² Wood GD, Schemehorn BR. Enamel fluoride uptake study. Indianapolis: Oral Health Research Institute, School of Dentistry, Indiana University.

³ Schemehorn BR, Zwart A. Relative dentin abrasion test on dentifrices. Indianapolis: Oral Health Research Institute, School of Dentistry, Indiana University.

⁴ Gultz J, Kaim J, Scherer W. Whitening efficacy of a whitening toothpaste creme. (Abstract #2747) J Dent Res 1998;77:975. (Lit #51)

⁵ Gultz J, Lopresti J, Settembrine L, Scherer W. Clinical efficacy of a whitening toothpaste. (Abstract #2739) J Dent Res 1998;77:974. (Lit #48)

Flor-Opal® Varnish bílý

FLUORIDAČNÍ LAK S OBSAHEM 5% FLUORIDU SODNÉHO



- Intenzivní, dlouhotrvající účinné ošetření fluoridem
- Unikátní systém míchání a nanášení
- Rychlá a snadná aplikace
- Dvě skvělé příchutě: máta a žvýkačka

Flor-Opal Varnish bílý je ochucený 5% fluorid sodný v pryskyřičném základě s xylitolem jako sladidlem.

Systém míchání a nanášení zabraňuje problémům vlastním fluoridačním lakům - separaci fluoridů díky sedimentaci.

Ohebná kanyla FX Flex se štětečkem na špičce umožní snadnou plynulou aplikaci laku na všechny požadované zubní plochy.



Promíchejte obsah stříkačky přetlačením materiálu z bílé stříkačky do čiré 5x tam a zpět. Před nanášením přetlačte lak do bílé stříkačky.



Pevně našroubujte kanylu FX Flex a pokud je to třeba, ohněte špičku kanyly o 90°. Lak nemůže volně protékat, jestliže je kanyla ohnuta příliš.



Osušte zuby před aplikací. Vytlačte malou kapku na špičku kanyly. Rozetřete do tenké vrstvy na ošetřovaný povrch.



Typické laky jsou žluté - viz pravá horní jednička. Flor-Opal Varnish je esteticky bílý - viz ostatní horní řezáky.



Silné dekalifikace a kazy způsobené špatnou hygienou v průběhu ortodontické léčby. Je doloženo, že aplikace fluoridového laku každých 6 týdnů může významně snížit množství dekalifikací¹.



Jemně přetáhněte rty přes povrch zubů tak, aby slina reagovala s lakem. Lak ztuhne po kontaktu se slinami a zůstane na místě nanesení několik dnů až týdnů.



Nečistěte zuby nebo nežvýkejte a nekousejte tvrdé potraviny 4-6 hodin po ošetření.

504505
504506

Flor-Opal Varnish bílý 5-kit
5 x 0,5 ml (0,52 g) Flor-Opal Varnish bílý, 7x kanyla FX Flex
Žvýkačka
Máta

EXPIRACE: 18 MĚSÍCŮ

504503
504504

Flor-Opal Varnish bílý 20-kit
20 x 0,5 ml (0,52 g) Flor-Opal Varnish bílý, 25 x kanyla FX Flex
Žvýkačka
Máta

506025
506026

FX Flex kanyly
25 ks
75 ks



K aplikaci objednejte:
kanyly FX Flex

¹ Stecksén-Blicks C et al.: Caries-Preventive Effectiveness of a Fluoride Varnish: A Randomized Controlled Trial in Adolescents with Fixed Orthodontic Appliances. Caries Research Vol 41, Jan. 2007

Universal Dentin Sealant

PŘÍPRAVEK KE SNÍŽENÍ CITLIVOSTI ZUBŮ



kanyla Black Mini

- Rychlá aplikace – nanést kanylkou s kartáčkem & osušit
- Ideální po root planingu a odstranění zubního kamene

Biokompatibilní, nepolymerovatelná, vysokomolekulární pryskyřice v těžkém organickém rozpouštědle. K pokrytí citlivých kořenů po root planingu, minimalizuje postoperační diskomfort pacienta po výkonu uzavřením dentinových tubulů. Vytváří v podstatě neproniknutelnou, dočasnou, biokompatibilní bariéru proti bakteriím, pryskyřicím, kyselinám, cementům, výplním, atd. Universal Dentin Sealant je určen pro ochranu a snížení citlivosti v cervikální oblasti zubů. Je-li nutno v kavitě použít bázi nebo podložku, použijte Ultra-Blend plus (str. 60).



Universal Dentin Sealant je nanesen v cervikální oblasti kanylou Black Mini Brush přímo ze stříkačky.

500265 Universal Dentin Sealant kit
4 x 1,2 ml (1,08 g) Universal Dentin Sealant
20 kanyl Black Mini Brush

500266 Universal Dentin Sealant
4 x 1,2 ml (1,08 g)

EXPIRACE: 30 MĚSÍCŮ



K aplikaci objednejte:
kanyly Black Mini Brush

Ultrapro® Tx Prophy Pasta Novinka

- Prophy pasta v jednorázových kalíšcích s dávkou postačující pro 1 aplikaci (na 1 pacienta)
- Složení, které brání rozstříkávání pasty
- Půchutě máta, žvýkačka bez barviv a originální značka Ultradentu lesní ovoce
- Snadno a dokonale se oplachuje - eliminuje výskyt zbytkových částiček
- Obsahuje fluorid a dusičnan draselný; neobsahuje lepek



Leštící pasta na sklovinu, v praktických jednorázových kalíšcích s dávkou na jedno použití. Tři zrnitosti, tři skvělé příchutě. S obsahem 1,23% fluoridových iontů a 5% dusičnanu draselného. K použití při dentálních leštících a čistících procedurách jako součást profesionální dentální profylaxe.

Ultrapro Tx Prophy Pasta, 200 ks (každý 2 g)

Zrnitost	Jemná	Střední	Hrubá
Chladivá máta	508309	508310	508311
Lesní ovoce		508312	508313
Žvýkačka		508314	508315

EXPIRACE: 22 MĚSÍCŮ

ultrapro[®] Tx Novinka

LEŠTÍCÍ NÁSADEC PRO PROFYLAXI

- Lehký - 60 g
- Ergonomický, hladký, vyvážený design
- Otočný o 360°
- Účinně čistí obtížně odstranitelné skvrny
- Provoz bez vibrací
- Minimální požadavky na údržbu



Ultrapro Tx hygienický leštící násadec je vyroben z lehkého, eloxovaného hliníku používaného v leteckém průmyslu. Vyvážený násadec s připojením na principu třecího spoje, s minimálními požadavky na údržbu, umožňuje hladký provoz bez vibrací. Motor s redukcí 5:1 má výstupní otáčky 3000 - 3500 ot/min a variabilní pracovní tlak 2,5 - 3,15 atm (35-45 psi). Měkký start vzduchem poháněného motoru zabraňuje rozstříkávání, zatímco vysoký kroučící moment umožňuje s výborným účinkem odstranit odolné skvrny.

508302 Ultrapro Tx Kit
1 mikromotor, 3 kuželové násadce

508306 Ultrapro Tx mikromotor
1 ks

Ultrapro Tx kuželové násadce
508303 zelený, 1 ks
508304 červený, 1 ks
508305 modrý, 1 ks

508316 Ultrapro Tx olej pro leštící násadec
15 ml



Ultrapro Tx

JEDNORÁZOVÉ LEŠTÍCÍ KONCOVKY

- Design zajišťující lehkoběžný, tichý chod
- Ergonomický tvar snižuje mikrotraumata rukou
- 100% bez latexu
- Kalíšky uzpůsobené pro lepší subgingivální dosah
- Barevně odlišené kalíšky pro snadnou identifikaci tvrdé (zelená) nebo měkké (modrá) prophy koncovky



Ultrapro Tx
508308 Měkké - zelená, 144 ks
508307 Tvrdé - modrá, 144 ks
508318 Měkké - zelená, 500 ks
508317 Tvrdé - modrá, 500 ks