

Ultradent SPECIAL

3



2026

4. 5. - 28. 6. 2026



Dokonalý úsměv začíná tady

Opalescence



3 kroky ke spokojeným pacientům

1. Ukažte vašim pacientům, jak snadné je použití Opalescence Go.
2. Nabídněte jim bělení Opalescence Go ve vaší ordinaci.
3. Nechte je vybělit Opalescencí Go.

Sleva
25%



1. Vyjměte z balení.



2. Vystředte na zubní oblouk.



3. Jemně přisajte nebo polkněte.



4. Ostraňte vnější nosič.



5. Je-li třeba, jemně upravte.



6. Nechte působit 60-90 minut.

Pacient kit **1 890 Kč** ~~2 390,-~~
(10× dolní + 10× horní nosič + Opalescence zubní pasta 30 ml)
minikit (4x dolní + 4x horní nosič), příchut: máta, meloun

Mini kit **900 Kč** ~~1 170,-~~
(4× dolní + 4× horní nosič) / příchut: máta, meloun
minikit (4x dolní + 4x horní nosič), příchut: máta, meloun

Opalescence GO 6%

Opalescence GO 6% - univerzální nosič s 6% peroxidu vodíku okamžitě k použití.

“Bělení za pochodu”: bez otiskování, bez laboratorní práce, bez čekání na zhotovení bělicího nosiče.

Nosiče na jedno použití se po nasazení přizpůsobí tvaru pacientova chrupu tak, že gel zůstává v nosiči a nevytéká.

Profesionální vybělení zubů ve frontálním i distálním úseku chrupu. Dlouhodobá výdrž vyběleného odstínu (v průměru několik let).

Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) snižují citlivost. 20% vody snižuje dehydrataci v průběhu bělení a relaps k původnímu odstínu.

Doba 1 aplikace: **60-90 minut/ den.**

Doba bělicího cyklu: **5-10 aplikací.**

Vhodné i na oživení a prodloužení trvanlivosti odstínu po předchozím ordinacním bělení nebo po profesionálním čištění zubů.

Vhodné i pro pacienty s rovnátky.

Cenově dostupné.

Vybělené zuby pomohou rozzářit váš svět

Opalescence™ PF

Bezpečné bělení bez rizika poškození zubů:

- Opalescence má pH 6,9
- Dlouhodobá výdrž vyběleného odstínu (až několik let)
- Zaručený bělicí výkon po celou dobu životnosti gelu = předvídatelná doba bělení
- a výsledky u většiny pacientů
- **20% vody** chrání před dehydratací zubů a návratem k původnímu odstínu
- **formula PF** (fluorid sodný a dusičnan draselný) minimalizuje citlivost při a po bělení

Doba bělicího cyklu: v průměru **5-10 aplikací**. 1/3–1/2 stříkačky na 1 nosič

Vybělené zuby s úžasně dlouhou výdrží odstínu (až několik let)
– není třeba přebělovat každý měsíc!

Sleva
10%

Pacient Kit

8×1,2 ml stříkačka Opalescence™ PF
1× 25 ml bělicí zubní pasta Opalescence
1× krabička na nosiče
1× kartička vzorník odstínu

2 400 Kč ~~2 670,-~~

Doktor Kit

8× 1,2 ml stříkačka Opalescence™ PF
2× folie Soft Tray
1× 1,2 ml LC Block-Out Resin
1× 25 ml bělicí zubní pasta Opalescence
1× krabička na nosiče
1× kartička vzorník odstínu

2 640 Kč ~~2 930,-~~

Refill

40×1,2 ml stříkačka Opalescence™ PF

8 430 Kč ~~9 370,-~~



Denní bělení Opalescence™ PF 16%
16 % karbamidu peroxidu
Doba 1 aplikace: **4-6 hodin/ den**

Noční bělení Opalescence™ PF 10%
10 % karbamidu peroxidu
Doba 1 aplikace: **8-10 hodin/ noc**

Tip

Bělení doplňte Bělicí zubní pastou Opalescence™ Original nebo Opalescence™ Sensitivity Relief. Pro výrobu bělicího nosiče používejte fólie o tloušťce **0,9 mm**, silnější fólie mohou být příčinou citlivosti zubů při bělení.

Bělicí nosič MUSÍ MÍT rezervoáry!

Bez nich je významně snížen účinek bělení a prodlužuje se celková doba bělení.

Opalescence™ whitening toothpaste

ZUBNÍ PASTA OPALESCENCE™ CHRÁNÍ ZUBY PŘED KAZEM A PIGMENTACÍ.
SKVĚLE UDRŽÍ BÍLÝ ODSTÍN. SKVĚLE CHUTNÁ.

- Jedinečná směs tri-oxidu křemičitého aktivně odstraňuje povrchové skvrny.
- Odstraněním povrchových skvrn zesvětlí zuby o dva odstíny jen za jeden měsíc¹.
- Bezpečná pro každodenní, dlouhodobé použití, vhodná pro celou rodinu.
- Výjimečné vstřebávání fluoridu sodného, pomáhá lépe chránit před kavitami a posiluje sklovinu.
- Sladidlo Xylitol pomáhá snižovat riziko zubního kazu.
- Nizkoabrazivní. 78 RDA zajišťuje maximální ochranu sklovin, dentinu a výplně³.
- Vhodná i pro nebělené zuby.
- Neobsahuje Triclosan ani oxid titaničitý.

Sleva
10%

Na balení 100 ml



Bělicí zubní pasta Opalescence™ Original

4,8× větší absorpce fluoridů sklovinou (splňuje specifikace ADA)

500401 100 ml **255 Kč** ~~285,-~~
500402 20 ml **105 Kč**

Bělicí zubní pasta Opalescence™ Sensitivity Relief

5% dusičnanu draselného pro snížení citlivosti
snižuje citlivost zubů – např. při a po bělení

503470 100 ml **275 Kč** ~~305,-~~
503472 20 ml **110 Kč**



Tip

Chcete bělit a máte citlivé zuby? Začněte používat Bělicí zubní pastu Opalescence™ již 14 dní před bělením. Pomůže vám snížit nebo odstranit citlivost.

**Profesionální ordinační bělení k léčbě
medicínských změn odstínů zubů*.**

**Sleva
20%**

- bělicí gel s **40% peroxidu vodíku**
- patentované složení PF (dusičnan draselný + fluoridy) minimalizuje citlivost při a po bělení
- pouze na **2×20 min** při jedné návštěvě
- **pH 6,9** po smíchání – šetrný ke sklovině
- **20%** vody-minimální dehydratace při bělení
- k bělení celého čelistního oblouku nebo pouze jednotlivých zubů
- o použití Opalescence Boost rozhoduje **zubní lékař**

Určen pro případy hlubokých diskolorací převážně anorganického původu, které jsou obtížně bělitelné domácím (tzv. kosmetickým) bělením. Lze použít k ošetření zubů pro následující indikace**:
zabarvení zubů v důsledku endodontického ošetření, zabarvení v důsledku pulpálního krvácení (materiály, ošetření, nekróza pulpy), resorpce kořene, tetracyklinové a minocyklinové zuby, amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta, fluoróza, alkaptonurie, vrozená erythropetická porfyria, vrozená hyperbilirubinémie, Turnerova hypoplasie aj.

Zdravotnický prostředek tř. IIa, CE platné do r. 2028.

Více informací o produktu u Vašeho obchodního zástupce.
Před použitím si přečtěte návod k použití.

* pre-eruptivních nebo post-eruptivních endogenních diskolorací způsobených onemocněním, poraněním nebo lékařským ošetřením a pigmenty anorganického původu migrujících zevnitř zubu hluboko do dentinu. Není alternativou kosmetického bělení Opalescence PF nebo Opalescence GO.
** Indications and efficacy of tooth bleaching using high concentration of hydrogen peroxide: Prof. Dr. Olga Polydorou, University Medical Centre Freiburg, Germany, 2014.



504750 Intro Kit – pro 2 pacienty: 5.650 Kč 7.060,-
4× 1,2 ml stříkačka Boost 40%
2× 1,2 ml OpalDam Green
2× IsoBlock
20× kanyla Black Mini
2× Luer Vac
2× kanyla SurgiTip

504751 Pacient Kit – pro 1 pacienta: 3.100 Kč 3.870,-
2× 1,2 ml stříkačka Boost 40%
1× 1,2 ml Opalam Green
1× IsoBlock
10× kanyla Black Mini

504754 Econo Refil: 13.990 Kč 17.540,-
20× 1,2 ml Boost 40%



UltraEZ™ jedinečný gel pro rychlou úlevu při citlivosti zubů

Desensitizing Gel

Gel s 3% dusičnanu draselného a 0,25 % fluoridu sodného s postupným uvolňováním KNO₃. Okamžitý účinek. Nosiče naplněné gelem se v ústech přizpůsobí individuálnímu zubnímu oblouku pacienta. Dostupný i ve stříkačkách - plnění do individuálních nosičů.

Použijte při citlivosti a obnažení zubních krčků:

- při citlivosti na změny tepla a chladu
- při odstraňování zubního kamene
- před bělením (i ½ hodiny bezprostředně před bělením) a/nebo po bělení (lze použít i při domácím bělení mezi jednotlivými aplikacemi)

UltraEZ™ Combo Kit: 10× horní a 10× dolní nosič **2.295 Kč**** 2.550,-
UltraEZ™ Mini Kit: 4× horní a 4× dolní nosič **920 Kč**** 1.140,-
UltraEZ™ stříkačka: 4× 1,2 ml **920 Kč**** 1.150,-
UltraEZ™ stříkačka 20× 1,2 ml **3.600 Kč**** 4.000,-

**Sleva
10%**

**při objednání
dalších 2 produktů
Ultradent

Tip

Použijte jako závěrečné ošetření při citlivosti po ordinačním bělení.



Nové i v nových barevných variacích



Kit 506xxx: **46.790 Kč** 58.460,-

1 × VALO X LED COLOR lampa
 1 × externí difuzní čočka
 2 × nabíjecí baterie
 1 × nabíječka baterií
 1 × el. kabel pro napájení nabíječky
 nebo šňůrového adaptéru
(adaptér není součástí balení)
 držáček na lampu
 1 × oranžový ochranný štítek proti
 modrému světlu
 1 × vzorkové balení ochranných návléků.
NEOBSAHUJE 4 × externí čočku.

- 506539 VALO X Onyx Black
- 506519 VALO X Twilight Blue
- 506499 VALO X Nebula Green
- 506498 VALO X Stardust Gray
- 506497 VALO X Aurora Pink
- 506496 VALO X Horizon Red
- 506538 VALO X Galaxy Purple

VALO™ X

Širokospektrální LED polymerační lampa.



Kit 505973: **53.450 Kč** 66.810,-

1 × VALO X LED lampa (klasická)
5 × externí čočka (polymerační bodová
 polymerační ProxiBall
 diagnostická interproximální
 diagnostická transluminační
 diagnostická UV světlo)
 2 × nabíjecí baterie
 1 × nabíječka baterií
 1 × el. kabel pro napájení nabíječky
 nebo šňůrového adaptéru
1 × šňůrový adaptér
 držáček na lampu
 1 × oranžový ochranný štítek proti
 modrému světlu
 1 × vzorkové balení ochranných návléků

**20%
sleva**

- Průměr čočky 12,5 mm.
- Výkonné **speciální LED diody** (8 polymeračních, 4 pro bílé světlo).
- Rozsah vlnových délek 380–515 nm.
- Pro polymeraci všech dentálních materiálů včetně bulk- fill materiálů.
- Horní a spodní podsvětlené tlačítko s barevnou indikací režimu.
- Štíhlejší tělo z leteckého hliníku vysoce odolné proti poškození.
- Ergonomický design s plochou hlavičkou s výborným dosahem do všech částí úst.
- **Funkce Akcelerometr**-přepínání mezi polymeračními a/ nebo diagnostickými režimy pohybem zápěstí.
- Možnost jednoduše změnit napájení VALO X z bateriového na napájení ze sítě pomocí adaptéru, (adaptér **NENÍ** součástí balení).

2 polymerační a 2 diagnostické režimy

Polymerační režim:

širokospektrální LED diody
 2 polymerační výkony:
 standard (1100 mW/cm², 10 sekund),
 extra vysoký pulsní (2 200 mW/cm²,
 5 sekund 3 × puls s prodlevou)

Diagnostické režimy:

UV světlo pro detekci fluorescenčních materiálů
 (např. pečetidla fisur, výplně, indikátory plaku aj.).
 Bílé světlo pro přesnější odečet barvy zubu, výplní, protetiky,
 určení odstínu při bělení aj.
 Kompatibilní s externími polymeračními a diagnostickými čočkami
 VALO X (**NEJSOU** součástí balení).

**20%
sleva**

**ZÁRUKA
5 LET!!**

Tip:

Při polymeraci používejte
 ochranné návlěky VALO
 X/ VALO Grand: chráníte
 čočku polymerační lampy
 před znečištěním. Znečištěná
 nebo poškozená čočka = nižší
 polymerační výkon.

- Průměr čočky 12,5 mm.
- Výkonné **speciální LED diody** (8 polymeračních, 4 pro bílé světlo).
- Rozsah vlnových délek 380–515 nm.
- **Funkce Akcelerometr**-přepínání mezi polymeračními a/ nebo diagnostickými režimy pohybem zápěstí.
- Možnost jednoduše změnit napájení VALO X z bateriového na napájení ze sítě pomocí adaptéru (je součástí balení).

2 polymerační a 2 diagnostické režimy

Polymerační režim:

širokospektrální LED diody
 2 polymerační výkony: standard (1100 mW/cm², 10 sekund),
 extra vysoký pulsní (2 200 mW/cm², 5 sekund 3 × puls s
 prodlevou).

Diagnostické režimy:

UV světlo pro detekci fluorescenčních materiálů (např. pečetidla
 fisur, výplně, indikátory plaku aj.).
 Bílé světlo pro přesnější odečet barvy zubu, výplní, protetiky,
 určení odstínu při bělení aj.
 Externí polymerační a diagnostické čočky VALO X,
 (**JSOU** součástí balení - 5 ks celkem).

GEMINI EVO™

DIODOVÝ LASER 810÷980

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.



100
WATTS



GEMINI™ EVO – DIODOVÝ LASER 810÷980 na měkké tkáně

- **superpulsní výkon ve špičce 100 W** (peak)
- tři vlnové délky 810 nm, 980 nm, duální 810–980 nm pro optimální absorpci melaninu a vody
- rychlejší hladký řez, vysoká termální relaxace, tkáň se neškvaří
- Gemini špičky iniciované 5 mm (řezací) a neiniciované 7 mm (dezinfekční, dekontaminační)
- silnější podsvícení špičky-lepší viditelnost v místě zákroku
- bezdrátový nožní pedál a provoz na nabíjecí baterii

16 předvolených procedur ve 3 přehledných kategoriích zákroků:

- chirurgické – úprava a odstranění orálních tkání
- nechirurgické – dezinfekční, dekontaminační (dekontaminace parodontálních chobotů, sulku, kořenových kanálků)
- úleva od bolesti / podpora hojení s PBM adaptéry


3 fotobiomodulační adaptéry PBM:

- 1 extraorální (25 mm),
 - 2 intraorální (3 mm, 7 mm)
- aktualizace a vyhrazená technická podpora přes Wi-Fi připojení, Dashboard

Vhodný pro každodenní stomatologii i pro specializace (čelistní chirurgii, parodontologii, ortodontii, dentální hygienu aj.)

FOTOBIMODULAČNÍ INTRAORÁLNÍ A EXTRAORÁLNÍ ADAPTÉRY rozšiřují využití laseru v každodenní praxi o terapii/ léčbu bolesti a podporu hojení, např.:

- Léčba paralýzy obličejových nervů (pokleslé koutky, porucha hybnosti mimických svalů)
- Snížení hypersensitivity dentinu u řezáků, špičáků, premolárů, molárů
- Úleva od bolesti po extrakci třetího moláru
- Urychlení posunu zubů při ortodontické léčbě („speed orthodontics“)
- Myogenní i artrogenní poruchy TMJ
- Prevence a léčba zánětů sliznice
- Prevence a léčba herpes, podpora hojení a úleva od bolesti u vředů, aftů, herpes

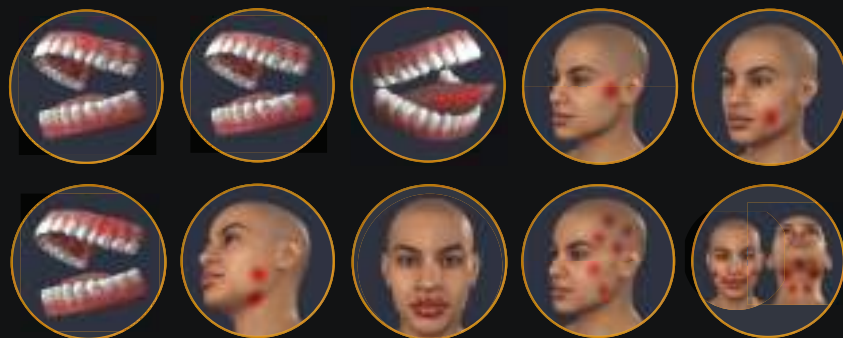

509121 Gemini EVO laser Kit:

- 1× napájecí zdroj
- 1× nožní pedál+ baterie + USB kabel
- 10× 5mm špička řezací
- 3× ochranné brýle
- 3× adaptéry PBM (25 mm, 7 mm, 3 mm)

Sleva
20%

305.320 Kč 384.650,-

Proč byste měli mít ve své ordinaci laser?
Co se s ním dá vše dělat? Přijďte na přednášku:
Diodové lasery: Otevřete dveře novým možnostem léčby

Kdy: úterý 19. května 2026

Kde: Brno



bit.ly/4ek1Arj

**POZOR.
ZMĚNA MÍSTA
KONÁNÍ!**



Přednášející:
Dr. Sergio A. Velasquez
Zubní lékař z univerzity
v Manizales v Kolumbii.

Kdy: středa 20. května 2026

Kde: Košice



bit.ly/3VfwkRH

Gemini špičky:

- 508993 iniciovaná špička 5 mm (řezací) 25 ks **8.050 Kč** 8.940,-
- 508994 neiniciovaná špička 7 mm (dezinfekční, neřezací) 25 ks **8.050 Kč** 8.940,-



Sleva
10%

- 508995 ochranné brýle Gemini EVO

8.160 Kč



- Fluoridační lak s 5 % fluoridu sodného (2,26 % fluoridových iontů).
- Účinná ochrana proti demineralizaci skloviny a zubnímu kazu, posiluje sklovinu (dle ADA¹).
- Vysoká míra uvolňování = množství fluoridu dosažitelné při každém ošetření.
- Nadprůměrné vstřebávání = účinnost absorpce fluoridových iontů.
- Nedávivé složení umožní ošetření problematických pacientů.
- **Xylitol** jako sladidlo, dodatečná ochrana proti bakterii streptococcus mutans.
- Patentovaná adheze = lepší retence, na zubech zůstává až 48 hodin.
- Neobsahuje barviva ani lepek.
- Snadná a rychlá aplikace během minuty – kartáčkem nebo kanylkou.
- **Jediný fluoridační přípravek určený i pro děti mladší 1 roku.**

**Sleva
10%**

Co ocení Vaši pacienti:

- Rychlá, jednoduchá aplikace: osušit zuby – nanést Enamelast-aktivovat slinou.
- Rychlá **úleva od citlivosti**: ošetření zubů nebo zubních krčků (např. při bělení).
- Ošetření **demineralizací v mezizubních prostorech** – prevence zubních kazů.
- **Doplněk ortodontické léčby** - předcházení nebo ošetření demineralizací.

Vynikající příchutě:

Několikanásobně účinnější oproti jiným fluoridovým přípravkům.



blistr	50 × 0,4 ml	3.670 Kč	4.070,-
blistr	200 × 0,4 ml	12.890 Kč	14.320,-
stříkačky	2 × 1,2 ml	399 Kč	440,-
stříkačky	20 × 1,2 ml	3.340 Kč	3.710,-

stříkačky kit 2×1,2 ml+ kanyly Soft Eze *nebo* Ekono kit 20×1,2 ml stříkačky bez kanyl - pouze v příchuti Walterberry

1. American Academy of Pediatric Dentistry. Policy statement on the use of fluoride. Adopted 1967. Reaffirmed 1977. Revised 2018. Frequently Asked Questions on Community Water Fluoridation. American Dental Association, Weyant RJ, Tracy SL, Anselmo T, et al. Topical fluoride for caries prevention. J Am Dent Assoc. 2013;144(11):1279-1291

UltraSeal XT hydro™

Jediné hydrofilní pryskyřičné pečtidlo fisur a jamek.

- tixotropní pečtidlo na bázi pryskyřice Bis-GMA s ideální viskozitou a tekutostí
- hydrofilní před polymerací - **nevadí vlhkost na okluzi**
- hydrofobní po polymeraci
- pokročilá adhezivní technologie-zvýšená retence
- **fluorescentní** - viditelné pod UV světlem při každé kontrole
- plnění 53 % - odolné vůči otěru
- uvolňuje/ propouští fluoridy
- radiopákní

odstíny: Opaque White a Natural



Před aplikací

Po aplikaci

Fluorescentní pod UV světlem



Kit:		5.760 Kč	6.400,-
	1× 1,2 ml stříkačka UltraSeal XT hydro™		
	1× 1,2 ml stříkačka Ultra-Etch™		
	20× kanyla Blue Micro		
	20× kanyla Inspiral Brush		
	Barva: natural, opákní bílá		
Refill: 4× 1,2 ml		4.050 Kč	4.500,-

**Sleva
10%**

BĚLENÍ NEVITÁLNÍCH ZUBŮ TECHNIKOU WALKING BLEACH

Opalescence™ Endo

- Viskózní lepkavý gel s 35 % peroxidu vodíku se zaručenou koncentrací, nestéká.
- Technika „walking bleach“ na 3–5 dnů.
- Pohodlně aplikujte ze stříkačky do dřeňové dutiny zubu, snadno se odstraní.
- Rychlé výsledky s větší trvanlivostí vyběleného odstínu.
- **Pozor: pouze pro bělení nevitálních zubů!**



Endo kit | obj. č. 501270 | **3 078,-**** **3 420,-**
Endo refill - 2x 1,2 ml | obj. č. 501323 | **2 925,-**** **3 250,-**

TIP

K dočasnému uzavření kavity použijte dočasný karboxylátový cement bez eugenolu UltraTemp Regular (kompatibilní s peroxidem vodíku) nebo provizorní světlem polymerovatelnou pryskyřici J-Temp.




CHEMICKO-ABRAZIVNÍ PASTA PRO MINIMALNĚ-INVAZIVNÍ OŠETŘENÍ ZUBŮ S FLUORÓZOU

Opalustre™

- Obsahuje 6,6% kyseliny chlorovodíkové a mikročástice karbidu křemíku.
- Trvale odstraní bílé a hnědé skvrny z povrchu skloviny do hl. 0,2mm.
- Max. 4 aplikace, každá po dobu 1 min.

Balení:

- Mini kit: 2x 1,2 ml Opalustre, 10x kanyla White Mac, 5x leštící kalíšek se štětínami Opal Cup, 5x leštící kalíšek Opal Cup
- Opalustre kit: 4x stříkačka 1,2 ml, 20x kanyla white mac, 10x kalíšek se štětínami opal cup, 10x leštící kalíšek opal cup.

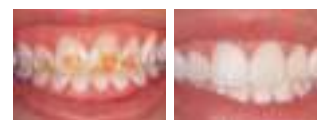

kit | obj. č. 500554 | **4 545,-**** **5 050,-**
mini kit 2 x 1,2ml + 20 kanyl | obj. č. 505554 | **2 727,-**** **3 030,-**
refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500555 | **3 249,-**** **3 610,-**
OpalCups štětínový 20 ks | obj. č. 505800 | **2 196,-**** **2 440,-**
OpalCups dokončovací 20 ks | obj. č. 505799 | **810,-**** **900,-**

TIP

Pokud jsou skvrny na zubech světlé, zkuste nejdříve vybělit. K izolaci měkkých tkání použijte OpalDam – viz katalog Ultradent 2025 str. 22.

SVĚTLEM TUHNOUCÍ PRYSKYŘIČNÁ BARIÉRA

OpalDam™ Green

- Světlem tuhnoucí pryskyřičná ochranná hmota pro dokonalou izolaci tkání a zubů.
- Použijte jako gigivální ochranu před použitím abrazivní pasty Opalustre nebo ordinačního bělení Opalescence Boost PF40%.
- Balení kit: 4x stříkačka 1,2 ml, 10x kanyla Micro 20ga, 10x kanyla Black Mini.



kit | obj. č. 501824 | **3 006,-**** **3 440,-**
refill - 20x 1,2 ml | obj. č. 501826 | **10 998,-**** **12 220,-**
refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 501825 | **2 709,-**** **3 010,-**

TIP

Před aplikací dobře osušte vzduchem měkké tkáně i zuby. Též před aplikací můžete použít hemostatický gel ViscoStat Clear: zastaví tvorbu sulkulárních tekutin a udrží měkké tkáně suché. Použijte jako gigivální ochranu před použitím abrazivní pasty Opalustre nebo ordinačního bělení Opalescence Boost PF 40%.



Zpolymerovanou pryskyřici snadno odstraníte v jednom kuse.

SVĚTLEM TUHNOUCÍ PRYSKYŘICE PRO REZERVOÁRY NA BĚLÍCÍCH NOSIČÍCH

LC Block-Out Resin

- Pro snadné, rychlé a správné vytvarování bělících rezervoárů na bělících nosičích.
- Nestéká, přesně se nanáší pomocí kanyly.
- Světlem tuhnoucí (led lampy).
- Další použití v laboratořích k opravám modelů, vyblokování podsekřivých prostorů aj.
- **Balení Kit obsahuje:** 4x 1,2 ml a 20 kanyl Black Mini.
- **Balení Econo Kit obsahuje:** 20x 1,2 ml a 20 kanyl Black Mini.



kit | obj. č. 500240 | **1 827,-**** **2 030,-**
econo kit | obj. č. 500242 | **6 129,-**** **6 810,-**
refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500241 | **1 530,-**** **1 700,-**



ZDRAVOTNICKÉ BĚLENÍ S KARBAMIDEM PEROXIDU DO ČEKÁRNY

Opalescence™ Quick PF 45 %

- 45 % gel karbamid peroxidu
- Obsahuje PF (dusičnan draselný a fluorid) ke snížení citlivosti při a po bělení
- Obsahuje 20 % vody-brání dehydrataci
- pH 6,9 nedemineralizuje sklovinu
- Pro intenzivní ošetření vnitřních změn zbarvení
- Aplikace na 30 minut, výsledky již po 1. aplikaci
- **K účinnějšímu bělení závažnějších diskolorací zubů.**
- **Je nutno zhotovit individuální bělící nosič.**

- **Pouze na indikaci zubního lékaře!**
- **Certifikát CE platný do r. 2028**



Před bělením (nedostatečný vývoj dentinu).

Po 4 aplikacích Opalescence Quick (bělící gel s 45 % karbamidu peroxidu = cca 15 % peroxidu vodíku).



4x 1,2 ml | obj. č. 505346 | **1 539,-**** **1 710,-**
20x 1,2 ml | obj. č. 505348 | **6 309,-**** **7 010,-**


K DLOUHODOBÉ SNÍŽENÍ CITLIVOSTI Universal Dentin Sealant

- Blokátor dentinových tubulů.
- Vytvoří dočasnou bariéru proti bakteriím, kyselinám, cementům, pryskyřicím, aj.
- Rychlé použití: nanést a osušit, NEPOLYMERUJE SE.
- Dlouhodobý účinek (týdny až měsíce).

Ideální k:

- pokrytí citlivých kořenů po root planingu
- omezení postoperační citlivosti po výkonu
- po paradontologickém ošetření
- **pečetění citlivých krčků před bělením**

- Balení: kit 4x1,2ml stříkačka + 20 kanyl
- Expirační doba: 60 měsíců.

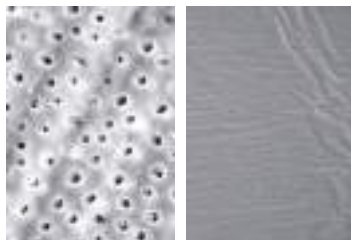

Na oba povrchy aplikována kyselina fosforečná na 20 sec.

Před aplikací kyseliny fosforečné byl povrch ošetřen Universal Dentin Sealantem.



refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500266 | **2 457,-****

2 730,-

Tvarovací nůžky Ultradent™ Ultra-Trim

- Pro přesné vystřížení okrajů nosičů.
- Pružinová konstrukce minimalizuje únavu prstů.
- Vyrobeny z nerezů.
- Doproděj.



1 ks | obj. č. 500605 | **3 222,-****

3 580,-

PEAK UNIVERSAL ADHESIVE SYSTÉM

Peak™ Universal Bond / Peak SE Primer

- **Peak Universal Bond** - světlem tuhnoucí adhezivum s 0,2% chlorhexidinu.
- Pro všechny dentální materiály (dentin, sklovina, kov, keramika, kompozit i **zirkon**).
- Nejvyšší pevnost vazby k dentinu (71,3MPa) a ke sklovině (51,7 MPa).
- Pro techniku Total-Etch, i Self-Etch.
- Nízký obsah plniva (7,5%) a minimální tloušťka filmu 2μm.
- Pro přímé i nepřímé rekonstrukce, bondování kořenových čepů a endodontických ošetření.
- Etylalkohol jako rozpouštědlo.

- **Peak SE Primer** – v JetMix stříkačce: vždy čerstvý, nedegraduje
- Primer s nejnižším pH na trhu (**pH 1,2**) -pevná vazba i ke sklovině.
- Doba použitelnosti po smíchání: **120 dnů**.
- Zajišťuje čerstvé, stabilní chemické složení.
- Snadný postup s nanesením jedné vrstvy.
- Přesná a pohodlná aplikace.
- Není třeba oplachovat.

stříkačky - 4x 1,2 ml | obj. č. 504553 | **3 204,-****

3 560,-

lahvička - 4 ml | obj. č. 504543 | **2 367,-****

2 630,-

Peak SE - 4x 1,2 ml | obj. č. 505135 | **2 646,-****

2 940,-



TIP

Doporučení: při technice self-etch s Peak Universal Bondem použijte **vždy** Peak SE Primer!

Sof-Tray™ fólie

- Fólie pro zhotovení nosiče/ chrániče zubů tvarováním pod tlakem.
- **Doporučená tloušťka pro bělicí nosič: 0,9 mm.**
- Regular – 25 ks, tloušťka 0,9 mm
- Medium – 20ks, tloušťka 1,5mm
- Heavy – 20 ks, tloušťka 2,0 mm



regular, tloušťka 0,9 mm - 25 ks | obj. č. 500226 | **1 008,-****

1 120,-

medium, tloušťka 1,5 mm - 20 ks | obj. č. 500227 | **1 008,-****

1 120,-

heavy, tloušťka 2,0 mm - 20 ks | obj. č. 500284 | **1 539,-****

1 710,-

PEČETIDLO KOMPOZITNÍCH VÝPLNÍ

PermaSeal™

- Světlem tuhnoucí metakrylátová neplněná pryskyřice.
- Váže se ke kompozitu a naleptané sklovině.
- Utěšňuje mikrospáry a nepravidlosti kompozitních výplní.
- Zabraňuje mikroprůsakům, snižuje možnost zbarvení okrajů výplní.
- Chrání a revitalizuje provizorní pryskyřičné náhrady, vytváří vysoký lesk.
- Slouží ke zvlhčení Ribbond vláknů.



Zpolymerovaný PermaSeal



Před aplikací



refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500631 | **3 231,-****

3 590,-

mini kit 2x 1,2 ml | obj. č. 501013K | **2 106,-****

2 340,-

TIP

RETRAKTOR TVÁŘÍ, RTŮ A JAZYKA

Umbrella™

- Přirozeně a jemně pomáhá držet ústa pacienta otevřená bez vytažování či roztahování rtů a namáhání TMJ.
- Chránič jazyka udržuje jazyk pohodlně opřený mimo pracovní oblast.
- Anatomické opěrky dovolují lékaři pracovat v ústech pacienta s maximální viditelností a komfortem pro pacienta.
- Umožňuje výborně odsávat během výkonu, nepřekáží v pracovním poli.
- Nevypovídá dávicí reflex u pacientů.
- Při kontrole skusu / otiskování může zůstat v ústech.

Jak zvolit velikost Umbrelly?

- Pokud pacient potřebuje velikost otiskovací lžice 2-3, zvolte Umbrellu Medium.
- Pokud pacient potřebuje velikost otiskovací lžice 4-6, zvolte Umbrellu Large.
- Pokud si nejste velikostí jisti, zvolte Umbrellu Large.

Střední rozvěrač Umbrella, 40 ks obj. č. 505162 2 970,-**	3 300,-
Střední rozvěrač Umbrella, 20 kusů obj. č. 504871 1 584,-**	1 760,-
Střední rozvěrač Umbrella, 5 kusů obj. č. 504870 432,-**	480,-
Velký rozvěrač Umbrella, 40 kusů obj. č. 505258 2 970,-**	3 300,-
Velký rozvěrač Umbrella, 20 kusů obj. č. 505257 1 584,-**	1 760,-
Velký rozvěrač Umbrella, 5 kusů obj. č. 505256 432,-**	480,-



TIP
Bezpečná při ordinacním bělení, nesklouzává, nepřekáží.



SEKČNÍ MATRICOVÝ SYSTÉM

HALO™

Nitinolové kroužky

- Super-elastická slitina niklu a titanu vydrží více než 1000 použití.
- Obrysy kroužku s výstupky bezpečně drží matricový pásek v přirozeném anatomickém tvaru.
- Provedení dovoluje použít při výplních MOD a jiných dostaveb II. tř.

Matricové pásky

- Anatomicky tvarované pro dosažení ideálního bodu kontaktu.
- Zakřivení okrajové linie redukuje nutnost dokončovacích operací.
- Tloušťka 0,038mm originál a pevné, 0,051mm nelepivé.

Klínky

- Stlačitelný střed umožní anatomické přizpůsobení matrice.
- Snadné zavedení klínku, v případě potřeby lze použít několik klínků najednou.
- Barevné značení usnadňuje rozpoznání velikosti klínků.

Originál Kit s nástroji obj. č. 504831 15 336,-**	17 040,-
Original Minikit bez nástrojů obj. č. 504835 6 678,-**	7 420,-
Firm kit, nelepivý bez nástrojů 11 530,- obj. č. 504833	5 990,-*
Matrice originál 1 566,-**	1 740,-
Matrice nelepivé 50 ks 1 836,-**	2 040,-
Kroužek universal, 1 ks obj. č. 505008 3 591,-**	3 990,-

Karuxelový zásobník:

- Přehledný, šetří čas.
- Snadno se desinfikuje desinfekcí na povrchy.

Balení:

- **504831 – HALO Originál Kit s nástroji:** 2 x – universal kroužky, 5x 25 originál matrice: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 7,7mm. 3x 25 klínků (velké, střední, malé), 1 – kleště, 1 - pinzeta, 1x Halo otočný zásobník
- **504833 – HALO Firm nelepivý bez nástrojů:** 2x Univerzální kroužky, 5x 20 ks pevných nelepivých matic 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 20 ks klínků - malé, střední a velké, 1 Halo otočný zásobník
- **504835 – HALO Original Minikit bez nástrojů:** 2x Univerzální kroužky, 4x 5 ks original matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 5 ks klínků – malé, střední a velké, 1 Halo otočný zásobník



UNIVERZÁLNÍ KOMPOZIT - UNIVERZÁLNÍ KOMPOZIT VŽDY PRO KAŽDOU VYPLŇ POUZE JEDEN ODSTÍN STACI.

Transcend

- Nanohybridní kompozit na bázi Bis – GMA,
- Naplněn z 60-61 % objemově (71 % váhově).
- Odstín **Universal Body** splyne s okolním zubem/zuby. Umožňuje použít **pouze 1 odstín**. Přesně vyvážená translucence a opacita.
- Výborný pro rekonstrukce bělých zubů.
- Výborně leštitelný s dlouhodobou výdrží lesku.
- Fluorescence blízká přirozenému zubu.
- Možnost dalších dentinových a sklovinových odstínů (např. pro výplně tř. III a tř. IV).
- **Inovovaná stříkačka s QuadraSpace – usnadňuje manipulaci, šetří materiál.**

stříkačka 4 g 2 232,-**	2 480,-
komple, 10 x 0,2g 1 287,-**	1 430,-
Econo Kit - stříkačky 4 x 4g 8 380,-**	2 990,-*
Econo Kit kit komple 4 365,-**	4 850,-



První kompozit, který se po vybělení zubů nemusí nahradit světlejším kompozitem: Splyne s odstínem okolních zubů. Jestliže pacient bude bělit bělícími gely Opalescence™, výplně se přizpůsobí světlejšímu odstínu.


* Platí do vyprodání.

HEMOSTATICKÝ VISKÓZNÍ GEL S 25 % CHLORIDU ŽELEZITÉHO
ViscoStat Clear™

- Transparentní gel pro **estetické zóny**.
- Pro zastavení slabšího krvácení a sulkulárních tekutin.
- Zůstává v sulku, nezanechává rezidua, nestéká.


Balení:

- 506409 Kit: 4x1,2ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub
- 506407 Indispense Kit: 1x30 ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub + 20x1,2ml prázdné stříkačky
- 506408 Indispense: 1x30 ml ViscoStat Clear

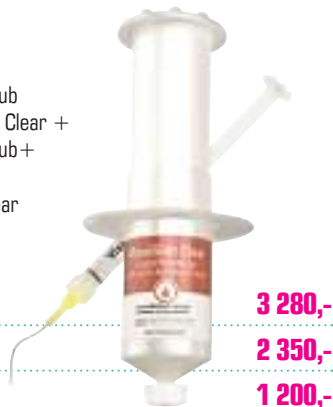
 Indispense kit | obj. č. 506407 | **2 952,-****
3 280,-

 Indispense - 30 ml | obj. č. 506408 | **2 079,-****
2 350,-

 Kit | obj. č. 506409 | **1 080,-****
1 200,-
VOVNÝ HEMOSTATICKÝ ROZTOK S 12,7 % SÍRANU ŽELEZITÉHO
Astringedent X™

- Nejrychlejší a nejsilnější hemostatikum Ultradent.
- Pro případy, kdy může být dosažení kvalitní hemostázy náročnější (např. při problematickém krvácení, které se obtížně zastavuje).
- pH ~1,0.


 Indispense, 30 ml | obj. č. 500690 | **1 755,-****
1 950,-

 Lahvička 30 ml | obj. č. 500112 | **1 809,-****
2 010,-

 Refill - stříkačky 20x1,2ml | obj. č. 505881 | **3 852,-****
4 280,-
SPLÉTANÉ RETRAKČNÍ VLÁKNO
Ultrapak™

- Snadné zavedení.
- Vynikající absorpce.
- Bezkonkurenční retrakce.



Vlákno ze 100% bavlny propletené do tvaru uzavřené tubuly se dobře napěchuje do sulku. Poté díky řízené expanzi optimálně odtáhne tkáň.

Balení:

- Kit: Ultrapak vlákno 1 x 00,0,1,2 + stojánek


 sada se stojánkem, vel. 00, 0, 1 a 2 | obj. č. 509330 | **2 259,-****
2 510,-

 č. 000 - černé, pro frontální zuby | obj. č. 509331 | **684,-****
760,-

 č. 00 - žluté, preparace a cementování faset | obj. č. 509332 | **603,-****
670,-

 č. 0 - fialové, dolní frontální zuby aj. | **558,-****
620,-

 č. 1 - modré, retrakce tkání při preparaci na korunku | obj. č. 509334 | **558,-****
620,-

 č. 2 - zelené, horní vlákno při metodě dvou vláken | obj. č. 509335 | **558,-****
620,-

 č. 3 - červené, pro místa se silnou gingivou | obj. č. 509336 | **558,-****
620,-
VISKÓZNÍ HEMOSTATICKÝ KOAGULAČNÍ GEL S 20 % SÍRANU ŽELEZATÉHO
ViscoStat™

- Hluboká aktivní hemostáza během několika sekund.
- Brání kontaminaci sulkulární tekutinou během bondování.
- Velmi šetrný k tkáním.
- Pro každodenní použití při operativních zákrocích, periodontálním ošetření, gingivektomi.
- Vynikající jako fixátor při pulpotomii – alternativa formocresolu šetrnější k tkáním.

Balení:

- 500647 Indispense Kit: 1x30ml ViscoStat + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub + 20x1,2ml prázdné stříkačky
- 500645 Indispense: 1x30ml ViscoStat
- 503093 Kit: 4x1,2ml ViscoStat + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub


 Indispense kit | obj. č. 500647 | **2 556,-****
2 840,-

 Indispense - 30 ml | obj. č. 500645 | **1 809,-****
2 010,-

 Intro kit - 4 x 1,2 ml + 20 kanyl | obj. č. 503093 | **936,-****
1 040,-
VOVNÝ HEMOSTATICKÝ ROZTOK S 15,5 % SÍRANU ŽELEZITÉHO
Astringedent™

- Klasický hemostatický přípravek pro hlubokou hemostázu.
- Zastavuje krvácení během několika sekund.
- K zástavě povrchového krvácení při různých dentálních výkonech a procedurách stomatologické chirurgie.
- pH ~1,0.


 Indispense 30 ml | obj. č. 500686 | **1 809,-****
2 010,-

 Lahvička 30 ml | obj. č. 500111 | **1 809,-****
2 010,-
Kanyla Metal Dento-Infusor™ Comfort Hub™ / Blue Mini™ Dento-Infusor™

- Plastové kanyly Blue Mini (0 1,20 mm) jsou pružnější než kanyly Metal.
- Dento-Infusor, mají měkčí kartáčky. Ideální pro kontrolu sulkulární tekutiny při nanášení adhezivních výplní blízko gingivy.
- Použití s: Astringedent, Astringedent X, ViscoStat, ViscoStat Clear.
- Balení: 20ks, 100ks, 500ks.


TIP

Hemostatické přípravky ViscoStat™ a Astringedent použijte s kanylou Metal Dento-Infusor™ Comfort Hub. Plastovou kanylu Blue Mini™ Dento-Infusor™ použijte pouze na čerstvě zhojený epitel, je méně agresivní.

 Dento-Infusor 20 ks | obj. č. 504954 | **558,-****
620,-

 Blue-mini kanyly 20 ks | obj. č. 500128 | **702,-****
780,-

 Dento-Infusor 100 ks | obj. č. 504955 | **2 412,-****
2 680,-

 Blue-mini kanyly 100 ks | obj. č. 501086 | **2 970,-****
3 300,-
