

Ultradent SPECIAL



2 2026

2. 3. - 3. 5. 2026



Vybělené zuby
pomohou rozzářit
váš svět



25%
sleva

Opalescence® PF

Bezpečné bělení bez rizika poškození zubů:

- Opalescence má pH 6,9
- Dlouhodobá výdrž vyběleného odstínu (až několik let)
- Zaručený bělicí výkon po celou dobu životnosti gelu = předvídatelná doba bělení a výsledky u většiny pacientů
- 20% vody chrání před dehydratací zubů a návratem k původnímu odstínu
- formula PF (fluorid sodný a dusičnan draselný) minimalizuje citlivost při a po bělení

Příchut: máta, meloun, bez příchutě.

Doba bělicího cyklu: v průměru 5-10 aplikací.

1/3–1/2 stříkačky na 1 nosič

Noční bělení Opalescence® PF 10%

10 % karbamidu peroxidu

Doba 1 aplikace: 8-10 hodin/ noc

Denní bělení Opalescence® PF 16%

16 % karbamidu peroxidu

Doba 1 aplikace: 4-6 hodin/ den

Vybělené zuby s úžasně dlouhou výdrží odstínu (až několik let) – není třeba přebělovat každý měsíc!

Patient Kit

0+1 2 ml stříkačka Opalescence® PF

1x 25 ml měřicí nádobka Opalescence® PF, 1x kartáček na zuby,
1x kartáček na jazyk

1.999 Kč ~~2.499,-~~

Dr.Kit

0+1 2 ml stříkačka Opalescence® PF, 3x 30 ml Dr. Tray

1x 1,2 ml (0,6 ml) Opalescence® PF, 1x 25 ml měřicí nádobka Opalescence®
1x kartáček na zuby, 1x kartáček na jazyk

2.199 Kč ~~2.699,-~~

Profil Kit 1,2 ml stříkačka Opalescence® PF

7.030 Kč ~~8.299,-~~

505379 Opalescence PF 10% Dr.kit máta exp. 31. 07. 2026*

1.599 Kč ~~2.999,-~~

TIP

Bělení doplňte Bělicí zubní pastou

Opalescence Original

nebo Opalescence Sensitivity Relief

Pro výrobu bělicího nosiče používejte fólie

o tloušťce 0,9 mm, silnější fólie mohou být

příčinou citlivosti zubů při bělení.

Bělicí nosič MUSÍ MÍT rezervoáry!

Bez nich je významně snížen

účinek bělení a prodlužuje se

celková doba bělení.



opalescence_czech_and_slovakia

Opalescence
go

- jednoduše
- pohodlně
- s krátkou dobou aplikace

10%
sleva

Opalescence GO 6 % - univerzální nosič s 6% peroxidu vodíku okamžitě k použití

"Bělení za pochodu": bez otiskování, bez laboratorní práce, bez čekání na zhotovení bělicího nosiče. Nosiče na jedno použití se po nasazení **přizpůsobí tvaru pacientova chrupu tak, že gel zůstává v nosiči a nevytéká.** Profesionální vybělení zubů ve frontálním i distálním úseku chrupu. Dlouhodobá výdrž vyběleného odstínu (v průměru několik let). Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) snižují citlivost. 20% vody snižuje dehydrataci v průběhu bělení a relaps k původnímu odstínu. Doba 1 aplikace: **60-90 minut/ den.** Doba bělicího cyklu: 5-10 aplikací.

Vhodné i na oživení a prodloužení trvanlivosti odstínu po předchozím ordinacním bělení nebo po profesionálním čištění zubů. Vhodné i pro pacienty s rovnátky.



Pacient kit 2.260 Kč 2.540,-
(10x dolní + 10x horní nosič
+ Opalescence zubní pasta 30 ml),
příchuť: máta, meloun

Mini kit 1.070 Kč 1.190,-
(4x dolní + 4x horní nosič)
příchuť: máta

Opalescence™ whitening toothpaste

ZUBNÍ PASTA OPALESCENCE™ CHRÁNÍ ZUBY PŘED KAZEM
A PIGMENTACÍ. SKVĚLE UDRŽÍ BÍLÝ ODSÍN. SKVĚLE CHUTNÁ.

- Jedinečná směs tri-oxidu křemičitého aktivně odstraňuje povrchové skvrny.
- Odstranění povrchových skvrn zesvětlí zuby o dva odstíny jen za jeden měsíc*.
- Bezpečná pro každodenní, dlouhodobé použití, vhodná pro celou rodinu.
- Výjimečné vstřebávání fluoridu sodného, pomáhá lépe chránit před kavitami a posiluje sklovinu.
- Sladidlo Xylitol pomáhá snižovat riziko zubního kazu.
- Nizkoabrazivní 78 RDA zajišťuje maximální ochranu skloviny, dentinu a výplně.
- **Vhodná i pro nebělené zuby.**
- Neobsahuje Triclosan ani oxid titaničitý.

Bělicí zubní pasta Opalescence™ Original
4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou (spĺňuje specifikace ADA)

500401 100 ml 255 Kč 285,-

Bělicí zubní pasta Opalescence™ Sensitivity Relief
5% dusičnanu draselného pro snížení citlivosti zubů – např. při a po bělení

503470 100 ml 275 Kč 305,-



Tip:

Chcete bělit a máte citlivé zuby?
Začněte používat Bělicí zubní pastu
Opalescence™ Sensitivity
již 14 dní před bělením.
Pomůže vám snížit nebo
odstranit citlivost.



opalescence_czech_and_slovakia

UltraEZ™

Desensitizing Gel

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

STOP citlivosti zubů: s úsměvem i po ordinačním bělení

Jedinečný gel pro rychlou úlevu při citlivosti zubů.

Gel s 3% dusičnanu draselného a 0,25 % fluoridu sodného s postupným uvolňováním KNO₃. Okamžitý účinek.

Nosiče naplněné gelem se v ústech přizpůsobí individuálnímu zubnímu oblouku pacienta. Dostupný i ve stříkačkách - plnění do individuálních nosičů.

Použijte při citlivosti a obnažení zubních krčků:

- při citlivosti na změny tepla a chladu
- při odstraňování zubního kamene
- před bělením (i 1/2 hodiny bezprostředně před bělením), v průběhu a po bělení

UltraEZ™ Combo Kit 10× horní a 10× dolní nosič	2.040 Kč	2.550,-
UltraEZ™ Mini Kit 4× horní a 4× dolní nosič	920 Kč	1.140,-
UltraEZ™ stříkačka: 4 × 1,2 ml	920 Kč	1.150,-

Tip:

Použijte jako závěrečné ošetření při citlivosti po ordinačním bělení.

20%
sleva



Opalescence™ BOOST 40%

Profesionální ordinační bělení k léčbě medicínských změn odstínů zubů*.

- bělicí gel s **40% peroxidu vodíku**
- patentované složení PF (dusičnan draselný + fluoridy) minimalizuje citlivost při a po bělení
- pouze na **2 × 20 min** při jedné návštěvě
- **pH 6,9** po smíchání – šetrný ke sklovině
- **20% vody** - minimální dehydratace při bělení
- k bělení celého čelistního oblouku nebo pouze jednotlivých zubů
- o použití Opalescence Boost rozhoduje **zubní lékař**

při objednání dalších
2 produktů UltraDent
10%
sleva**

Určen pro případy hlubokých diskolorací převážně anorganického původu, které jsou obtížně bělitelné domácím (tzv. kosmetickým) bělením.**

Zdravotnický prostředek tř. IIa, CE platné do r. 2028.

Více informací o produktu u Vašeho obchodního zástupce. Před použitím si přečtěte návod k použití.



504750 Intro Kit – pro 2 pacienty: **6.354 Kč**** ~~7.060 Kč~~
 4 × 1,2 ml stříkačka Boost 40%
 2 × 1,2 ml OpalDam Green
 2 × IsoBlock
 20 × kanyla Black Mini
 2 × Luer Vac
 2 × kanyla SurgiTip

504751 Pacient Kit – pro 1 pacienta: **3.483 Kč**** ~~3.870 Kč~~
 2 × 1,2 ml stříkačka Boost 40%
 1 × 1,2 ml Opalam Green
 1 × IsoBlock
 10 × kanyla Black Mini

504754 Econo refill: **15.786 Kč**** ~~17.540 Kč~~
 20 × 1,2 ml Boost 40%



* pre-eruptivních nebo post-eruptivních endogenních diskolorací způsobených onemocněním, poraněním nebo lékařským ošetřením a pigmenty anorganického původu migrujících zevnitř zubu hluboko do dentinu. Není alternativou kosmetického bělení Opalescence PF nebo Opalescence GO.

** Indications and efficacy of tooth bleaching using high concentration of hydrogen peroxide: Prof. Dr. Olga Polydorou, University Medical Centre Freiburg, Germany, 2014.

PEAK

UNIVERSAL ADHESIVE SYSTEM

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Peak™ Universal Bond – světlem tuhnoucí adhesivum s 0,2% chlorhexidinu

Peak™ SE Primer – samoleptací primer s pH 1,2

- Pro všechny dentální materiály (dentin, sklovina, kov, keramika, kompozit i **zirkon**).
- Nejvyšší pevnost vazby k dentinu (71,3MPa) a ke sklovině (51,7 MPa).
- Pro techniku Total-Etch, i Self-Etch.
- Nízký obsah plniva (7,5 %) a minimální tloušťka filmu 2µm.
- Pro přímé i nepřímé rekonstrukce, bondování kořenových čepů a endodontických ošetření.
- Etylalkohol jako rozpouštědlo.

25%
sleva

504543 Peak Universal Bond 1×4 ml lahvička
504553 Peak Universal Bond Refill 4×1,2ml stříkačka
505135 Peak SE Primer 4×1,2ml stříkačka

1.980 Kč	2.630,-
2.670 Kč	3.560,-
2.210 Kč	2.940,-


ULTRA-ETCH™

Samolimitující leptadlo pro minimalizaci citlivosti

Leptadlo s 35% kyselinou fosforečnou

- Samolimitující chemie leptá jen do hl. **1,9µm**.
- Penetruje do nejmenších fisur, ale nestéká na vertikálních površích.
- Neobsahuje polymery, nezanechává rezidua.
- Tixotropní, snadno proteče kanylou.
- Expirační doba **48 měsíců**.

20%
sleva

500685 Ultra-Etch Indispense 30 ml
500163 Ultra-Etch Kit 4×1,2ml + 20× kanyla
500167 Ultra-Etch Econo kit 20×1,2ml+ 40× kanyly
500164 Ultra-Etch refill 4×1,2ml
500168 Ultra-Etch refill 20×1,2ml

2.360 Kč	2.950,-
1.410 Kč	1.760,-
3.570 Kč	4.460,-
1.200 Kč	1.500,-
2.960 Kč	3.700,-



bit.ly/ultra-etch

Více balení viz Ultradent katalog 2024 str. 58

Hu-Fa Výhradní dovozce v ČR a SR



Nyní i v nových barevných variacích



Kit 506xxx: ~~52.690 Kč~~ 50.460,-

1 × VALO X LED COLOR lampa
1 × externí difuzní čočka
2 × nabíjecí baterie
1 × nabíječka baterií
1 × el. kabel pro napájení nabíječky
nebo šňůrového adaptéru
(adaptér není součástí balení)
držáček na lampu
1 × oranžový ochranný štítek proti
modrému světlu
1 × vzorkové balení ochranných návléků.
NEOBSAHUJE 4 × externí čočku.

506539 VALO X Onyx Black
506519 VALO X Twilight Blue
506499 VALO X Nebula Green
506498 VALO X Stardust Gray
506497 VALO X Aurora Pink
506496 VALO X Horizon Red
506538 VALO X Galaxy Purple

VALO™ X

Širokospektrální LED polymerační lampa.



Kit 505973: ~~66.190 Kč~~ 66.840,-

1 × VALO X LED lampa (klasická)
5 × externí čočka (polymerační bodová
polymerační ProxiBall
diagnostické interproximální
diagnostické transluminační
diagnostické UV světlo)
2 × nabíjecí baterie
1 × nabíječka baterií
1 × el. kabel pro napájení nabíječky
nebo šňůrového adaptéru
1 × šňůrový adaptér
držáček na lampu
1 × oranžový ochranný štítek proti
modrému světlu
1 × vzorkové balení ochranných návléků

10%
sleva

- Průměr čočky 12,5 mm.
- Výkonné **speciální LED diody** (8 polymeračních, 4 pro bílé světlo).
- Rozsah vlnových délek 380–515 nm.
- Pro polymeraci všech dentálních materiálů včetně bulk- fill materiálů.
- Horní a spodní podsvětlené tlačítko s barevnou indikací režimu.
- Štíhlejší tělo z leteckého hliníku vysoce odolné proti poškození.
- Ergonomický design s plochou hlavičkou s výborným dosahem do všech částí úst.
- **Funkce Akcelerometr**-přepínání mezi polymeračními a/ nebo diagnostickými režimy pohybem zápěstí.
- Možnost jednoduše změnit napájení VALO X z bateriového na napájení ze sítě pomocí adaptéru, (adaptér **NENÍ** součástí balení).

2 polymerační a 2 diagnostické režimy

Polymerační režim:

širokospektrální LED diody
2 polymerační výkony:
standard (1100 mW/cm², 10 sekund),
extra vysoký pulsní (2 200 mW/cm²,
5 sekund 3× puls s prodlevou)

Diagnostické režimy:

UV světlo pro detekci fluorescenčních materiálů
(např. pečeti, fisur, výplně, indikátory plaku aj.).
Bílé světlo pro přesnější odečet barvy zubu, výplní, protetiky,
určení odstínu při bělení aj.
Kompatibilní s externími polymeračními a diagnostickými čočkami
VALO X (**NEJSOU** součástí balení).

10%
sleva

ZÁRUKA
5 LET!!

Tip:

Při polymeraci používejte
ochranné návlěky VALO
X/ VALO Grand chráníte
čočku polymerační lampy
před znečištěním. Znečištěná
nebo poškozená čočka = nižší
polymerační výkon

- Průměr čočky 12,5 mm.
- Výkonné **speciální LED diody** (8 polymeračních, 4 pro bílé světlo).
- Rozsah vlnových délek 380–515 nm.
- **Funkce Akcelerometr**-přepínání mezi polymeračními a/ nebo diagnostickými režimy pohybem zápěstí.
- Možnost jednoduše změnit napájení VALO X z bateriového na napájení ze sítě pomocí adaptéru (je součástí balení).

2 polymerační a 2 diagnostické režimy

Polymerační režim:

širokospektrální LED diody
2 polymerační výkony: standard (1100 mW/cm², 10 sekund),
extra vysoký pulsní (2 200 mW/cm², 5 sekund 3× puls s
prodlevou).

Diagnostické režimy:

UV světlo pro detekci fluorescenčních materiálů (např. pečeti, fisur,
výplně, indikátory plaku aj.).
Bílé světlo pro přesnější odečet barvy zubu, výplní, protetiky,
určení odstínu při bělení aj.
Externí polymerační a diagnostické čočky VALO X,
(**JSOU** součástí balení - 5 ks celkem).

Jediné MTA, který proteče kanylou NaviTip 29ga.

ENDOEZE[™]
Ultradent Endodontics

MTA FLOW[™] WHITE

Opravný mineral-trioxid- agregate cement pro endodontická ošetření. Vhodný také pro aplikaci **nad klinickou linií**.
Nezabarvuje.



- ultrajemný zrnitý prášek a proprietární **gelové medium**
- hladká konzistence pro každou proceduru
- odolný proti vymývání
- přesné dávkování až k apexu pomocí kanyly **NaviTip 29ga Single port/ NaviTip 29ga**
- **bioaktivní**, podporuje hojení

Kit: 8-10 aplikací

- 1× MTAFlow White/ MTAFlow prášek (2g)
- 1× MTAFlow White/ MTAFlow gel (2ml)
- 1× odměrka s 2 odměrnými konci
- 20× kanyla Black Micro
- 10× stříkačka Skini
- 10× uzávěr Luer Lock
- 1× průvodce technikou míchání,
- 1× návod

505980 Kit MTAFlow White 6.220 Kč 6.910,-

NaviTip® Single SidePort 29ga®

Aplikační ohebná kanyla pro nanášení UltraCal XS, **MTAFlow, MTAFlow White.**

1 otvor po straně brání protlačení materiálu přes apex, v délkách 17, 21, 25 nebo 27 mm.

20× kanyla 1.800 Kč 4.990,-



NaviTip® 29ga, 30ga


Aplikační kanyla pro endodontické ošetření, v délkách 17, 21, 25 a 27 mm.

29ga (0,33mm): pro EndoRez, UltraCal XS, File-Eze a **MTAFlow/ MTAFlow White.**

30ga (0,30mm): pro hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, UltraEtch

20× kanyla 1.680 Kč 4.860,-

50× kanyla 3.740 Kč 4.150,-

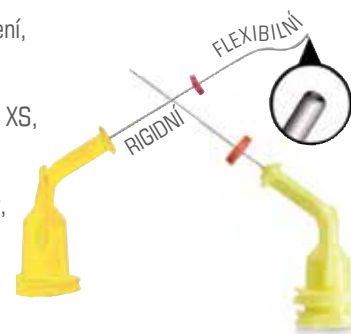

NaviTip® Double SidePort 31ga®

Aplikační ohebná kanyla **31ga(0,28mm)** pro hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, UltraEtch.

2 otvory po stranách brání protlačení kapaliny přes apex, v délkách 21 mm nebo 27 mm.

20× kanyla 1.910 Kč 2.120,-

50× kanyla 4.080 Kč 4.530,-



NaviTip FX 30ga®

Aplikační multifunkční pevná kanyla **30ga (0,30 mm)** pro Citric Acid. Čistí, oškrabuje a vyplachuje, v délkách 17 nebo 25 mm.

20× kanyla 17 mm 1.950 Kč 2.160,-

20× kanyla 25 mm 1.950 Kč 2.160,-




SLEVA
10%

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

LEPTADLO A SILAN NA KERAMIKU
Ultradent™ PORCELAIN ETCH & SILANE


- Pufrovaná 9% kyselina fluorovodíková.
- Pro intraorální i extraorální leptání keramiky.
- Nestéká.
- Nezabarvuje kompozity ani pryskyřičné cementy.
- 90 sekund leptání, oplach, 60 sekund Ultradent® Silane.

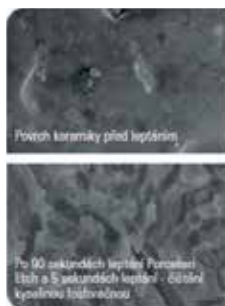

Silane refill - 2x 1,2 ml obj. č. 500410 990,-**	1 100,-
Porcelain Etch refill - 2x 1,2 ml obj. č. 500406 1 242,-**	1 380,-
Porcelain Etch + Silane - 2x 1,2 ml + 20 kanyl obj. č. 501019 1 737,-**	1 930,-
Porcelain Etch Kit obj. č. 500405 3 321,-**	3 690,-
Porcelain Repair Kit obj. č. 501108 6 804,-**	7 560,-

**LUBRIKANT KOŘENOVÝCH NÁSTROJŮ
PŘI ENDODONTICKÉM OŠETŘENÍ**
File-Eze™ EDTA Lubrikant

- 19 % EDTA viskózní gel.
- Rozpuštěný ve vodě: snadno se vyplachuje.
- **NEOBSAHUJE** peroxid vodíku – vhodný při následném použití světlem tuhneoucích pryskyřičných plniv (např. Endo-REZ).
- Aplikace také přímo do kanálku kanylou Navi Tip.

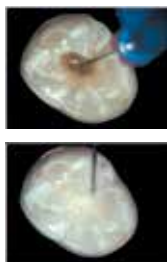

1. Naneste File-Eze pomocí kanyly NaviTip do kanálku. Můžete nanést File-Eze přímo na nástroj. Opracujte kanálek.

2. File-Eze vypláchnete z kanálku roztokem hypochloridu sodného. Když se hypochlorid sodný smísí se zbytky File-Eze, vzniká šumivá směs, která má přídavný čistící účinek a odstraní z kanálku přebytkový materiál.



TIP

Používejte při opracování kanálku a tvarování V-zón. Nepřetlačujte materiál přes apex.
Nepoužívejte místo roztoku EDTA (poslední výplach k otevření dentinových tubulů).

intro kit obj. č. 501075 3 312,-**	3 680,-
refill - 4x 1,2 ml obj. č. 500297 1 962,-**	2 180,-
IndiSpense - 30 ml obj. č. 500682 4 689,-**	5 210,-

**VÝPLACHOVÁ KAPALINA K OTEVŘENÍ DENTINOVÝCH TUBULŮ
PO OPRACOVÁNÍ KANÁLKU**
Ultradent™ EDTA 18% roztok

- Poslední výplachová kapalina před použitím chlorhexidinu.
- Ponechat v kanálku 30-60 sekund, pak opláchnout fyziologickým roztokem nebo sterilní vodou.
- **Balení:** 500162: IndiSpense 30 ml

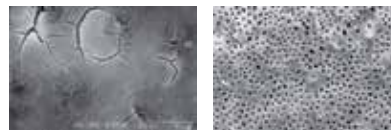

1. Kanálek po opracování před použitím EDTA.

2. Kanálek s otevřenými dentinovými tubuly po výplachu roztokem EDTA.



30 ml | obj. č. 500162 | 911,-**

980,-

INDIKÁTORY KAZU A KALCIFIKOVANÝCH VSTUPŮ DO KANÁLKU
Sable™ Seek™

- Zbarvuje kazivý a demineralizovaný dentin.
- Umožňuje přesné, bezproblémové dávkování.
- Tmavě zelená barva je ideální pro práci v blízkosti dřene.



Intro kit- 4x 1,2 ml + 20 kanyl | obj. č. 500233 | 2 970,-**

3 300,-

Refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500234 | 2 268,-**

2 520,-

Econo refill - 20x 1,2 ml | obj. č. 501805 | 8 316,-**

9 240,-

SVĚTLOVODNÉ KOŘENOVÉ ČEPY ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN PRO POST-ENDO
UniCore™ čepy

- Barevné značení pro snadné odlišení velikosti.
- Mikroporézní povrch zajišťuje mikromechanickou retenci.
- Nevžaduje žádné chemické ošetření/ kondicionování před použitím.
- RTG-kontrastní podle nejvyšších norem ISO.
- Průsvitný čep přenáší světlo v celé hloubce preparace.
- Konicita odpovídá přirozené anatomii zubu.
- Lze jej dobře odstranit, pokud je nutné opakované endodontické ošetření.

Balení – po 5 ks:

- Čepy velikosti 0 (apikální průměr 0,6mm)
- Čepy velikosti 1 (apikální průměr 0,8mm)
- Čepy velikosti 2 (apikální průměr 1 mm)
- Čepy velikosti 3 (apikální průměr 1,2mm)
- Čepy velikosti 4 (apikální průměr 1,5mm)

čepy velikosti 0 - 5 ks obj. č. 507135 2 106,-**	2 340,-
čepy velikosti 1 - 5 ks obj. č. 507125 2 106,-**	2 340,-
čepy velikosti 2 - 5 ks obj. č. 507126 2 106,-**	2 340,-
čepy velikosti 3 - 5 ks obj. č. 507127 2 106,-**	2 340,-
čepy velikosti 4 - 5 ks obj. č. 507128 2 106,-**	2 340,-



BĚLENÍ NEVITÁLNÍCH ZUBŮ TECHNIKOU WALKING BLEACH

Opalescence™ Endo

- Viskózní lepkavý gel s 35 % peroxidu vodíku se zaručenou koncentrací, nestéká.
- Technika „walking bleach“ na 3 - 5 dnů.
- Pohodlně aplikujte ze stříkačky do dřevové dutiny zubu, snadno se odstraní.
- Rychlé výsledky s větší trvanlivostí vyběleného odstínu.
- **Pozor: pouze pro bělení nevitálních zubů!**



TIP

K dočasnému uzavření kavity použijte dočasný karboxylátový cement bez eugenolu UltraTemp Regular (kompatibilní s peroxidem vodíku) nebo provizorní světlem polymerovatelnou pryskyřici J-Temp.



Endo kit | obj. č. 501270 | **3 078,-****

3 420,-

Endo refill - 2x 1,2 ml | obj. č. 501323 | **2 925,-****

3 250,-

PROVIZORNÍ HYDROFILNÍ CEMENT BEZ EUGENOLU NA PRYSKYŘIČNÉ BÁZI

UltraTemp™ REZ II

- K fixaci provizorních náhrad, je-li požadovaná delší retence (2–4 týdny).
- RTG kontrastní.
- Fluorescentní-dobře viditelný pod UV světlem.
- Výborně těsní.
- Odolává žvýkacím silám a slinám (protetika dobře drží).
- Složení bez eugenolu nebude narušovat vazebnou sílu.
- Doba tuhnutí 1 až 2 minuty.
- **Nevhodný v kombinaci s peroxidovými přípravky!**



UltraTemp REZ II Fast Set Kit | obj. č. 506061 | **2 772,-****

3 080,-

POLYKARBOXYLÁTOVÝ CEMENT BEZ EUGENOLU PRO PROVIZORNÍ FIXACE / VYPLNĚ

UltraTemp™

- Pro **krátkodobé** provizorní fixace (korunky, inlaye): **1-2 týdny**.
- Dočasné uzavření kavity.
- **Dočasné uzavření kavity při endo bělení do dutiny zubu.**
- **Hydrofilní**-nezpůsobuje citlivost.
- **Bez eugenolu**, šetrný k pulpě - nedráždí.
- Výborně těsní - brání průniku bakterií.
- Pracovní čas: 2-3min.
- Snadno jej odstraníte.



1 x 5 ml + 20 kanyl | obj. č. 505916 | **2 772,-****

3 080,-

PROVIZORNÍ SVĚTLEM TUHNOUCÍ PRYSKYŘICE

J-Temp™

- Radioopákní, světlem tuhnoucí, zatékavá provizorní pryskyřice na metakrylátové bázi.

KLINICKÉ INDIKACE: 4 V 1



Dočasné výplně (endodontické, inlaye/onlaye, dostavba hrbolků, bělení walking bleach).



Doplnění zubní struktury pro upevnění koferdamové spony a jako bariéry proti endodontickým irigantům.



Dlahování mezi více kapkami implantátu při otiscích k zamezení deformací otiskovacího materiálu.



Frontální nákusy a dočasné nákusné valy během ortodontické léčby, dočasné okluzní dostavby v ortodonci.



kit 4 x 1,2ml + 20 kanyl
obj. č. 504897 | **1 377,-****

1 530,-

ZDRAVOTNICKÉ BĚLENÍ S KARBAMIDEM PEROXIDU DO ČEKÁRNY

Opalescence™ Quick PF 45 %

- 45 % gel karbamidu peroxidu
- Obsahuje PF (dusičnan draselný a fluorid) ke snížení citlivosti při a po bělení
- Obsahuje 20 % vody-brání dehydrataci
- pH 6,9 nedemineralizuje sklovinu
- Pro intenzivní ošetření vnitřních změn zbarvení
- Aplikace na 30 minut, výsledky již po 1. aplikaci
- **K účinnějšímu bělení závažnějších diskolorací zubů. Je nutno zhotovit individuální bělicí nosič.**

- Pouze na indikaci zubního lékaře!

- Certifikát CE platný do r. 2028



4x 1,2 ml | obj. č. 505346 | **1 539,-****

1 710,-

20x 1,2 ml | obj. č. 505348 | **6 309,-****

7 010,-



Před bělením (nedostatečný vývoj dentinu).



Po 4 aplikacích Opalescence Quick (bělicí gel s 45 % karbamidu peroxidu = cca 15 % peroxidu vodíku).



30 - 35% PASTA HYDROXIDU VÁPENATÉHO
UltraCal™ XS

- Lze dávkovat kanylou NaviTip 29ga - doporučeno.
- Vysoké pH 12,5.
- Léčí infikované kanálky, podporuje hojení kosti.
- Použijte vždy, když nemůžete kanálek vysušit (mokvání, krvácení).

Balení:

- 4x 1,2ml stříkačka, 20x kanyla NaviTip – sortiment
- 20x 1,2ml stříkačka


TIP

Ucpala se Vám někdy kanyla NaviTip 29ga UltraCal XS? Před použitím UltraCal XS propláchněte kanylu roztokem hypochloridu sodného nebo chlorhexidinu. Problém tímto vyřešíte.

mini kit 2x 1,2ml + NaviTip kanyly
obj. č. 501024 | **918,-****

1 020,-

kit | obj. č. 505144 | **2 907,-****

3 230,-

refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 505145 | **1 602,-****

1 780,-

refill - 20 x 1,2 ml | obj. č. 505149 | **5 517,-****

6 130,-

ROZTOK KYSELINY CITRONOVÉ K ČIŠTĚNÍ A KONDICIONOVÁNÍ KÖRENOVÝCH KANÁLKŮ
Citric Acid™ 20%

- Rozpouští a odstraňuje hydroxid vápenatý a smear layer.
- Otevírá dentinové tubuly a lubrikuje.


TIP

Aplikujte pomocí kanyly NaviTip FX ze stříkačky UltraDent 1,2ml.

30 ml | obj. č. 500329 | **1 566,-****

1 740,-

KOMPOZIT PRO UTĚSNĚNÍ A SNADNOU INDIKACI VSTUPU DO ENDODONTICKY OŠETŘENÝCH KÖRENOVÝCH KANÁLKŮ
PermaFlo™ Purple

- Flow kompozit.
- K zapečetění a identifikaci endodonticky ošetřených kanálků a/nebo dna pulpy.
- Brání mikroprůsakům.
- **Neprosvítá přes výplně.**



Purple - 2x 1,2 ml + 4 kanyly | obj. č. 500962 | **2 637,-****

2 930,-

SEALER KÖRENOVÝCH KANÁLKŮ
EndoREZ™

- **Hydrofilní self-priming pryskyřičný sealer kořenových kanálků (UDMA).**
- Biokompatibilní.
- 3D plnění, důkladné utěsnění.
- Zatékavý do apikální třetiny i do tubulů-aplikace kanylou.
- RTG kontrastní.



EndoREZ proniká hluboko do dentinových tubulů a díky obsahu nanočástic se adaptuje do stěn kanálků.

Předvídatelný výsledek, dobře kontrolovatelný na rtg snímku, umožňuje opětovné ošetření i vložení kořenového čepu.



Plnění kanálků pomocí kanyly NaviTip.



5 ml + 20x míchací kanyla | obj. č. 505900 | **5 220,-****

5 800,-

DUÁLNE TUHNOUCÍ KOMPOZITNÍ FIXAČNÍ A DOSTAVBOVÁ PRYSKYŘICE
PermaFlo™ DC®

- Vícenásobné použití včetně cementace čepu, dostavby jádra a fixace protetiky.
- Nejmenší tloušťka filmu 8 μm.
- Odolný proti otěru.
- Maximální pevnost.
- RTG-kontrastní.
- Nízké polymerizační smrštění.
- Smíchání v míchací kanyle.
- Pracovní čas 2,5 minuty, doba chemického tuhnutí 5–8 minut.
- Kompatibilní s technikou totálního leptání i samoleptání.
- Odstíny: A2, A3.5, Translucent a Opákní bílá.



refill - 12 g + 40 kanyly | **3 249,-****

3 610,-

VÍCE MOŽNOSTÍ

Selhání NENÍ ani jednou z nich



Cementace
čepu



Dostavba
jádra



Fixace

SEKČNÍ MATRICOVÝ SYSTÉM

HALO™

Nitinolové kroužky

- Super-elastická slitina niklu a titanu vydrží více než 1000 použití.
- Obrysy kroužku s výstupky bezpečně drží matricový pásek v přirozeném anatomickém tvaru.
- Provedení dovoluje použití při výplních MOD a jiných dostaveb II. tř.

Matricové pásky

- Anatomicky tvarované pro dosažení ideálního bodu kontaktu.
- Zakřivení okrajové linie redukuje nutnost dokončovací operací.
- Tloušťka 0,038mm originál a pevné, 0,051mm nelepivé.

Klíčky

- Stlačitelný střed umožní anatomické přizpůsobení matrice.
- Snadné zavedení klínku, v případě potřeby lze použít několik klínků najednou.
- Barevné značení usnadňuje rozpoznání velikosti klínků.

Karuxelový zásobník:

- Přehledný, šetří čas.
- Snadno se desinfikuje desinfekcí na povrchy.

Balení:

- **504831–HALO Originál Kit s nástroji:** 2 x– universal kroužky, 5x 25 originál matrice: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 7,7mm. 3x 25 klínků (velké, střední, malé), 1 – kleště, 1 - pinzeta, 1x Halo otočný zásobník

- **504832–HALO Originál Kit bez nástrojů:** 2 x– universal kroužky, 5x 25 originál matrice: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 7,7mm. 3x 25 klínků (velké, střední, malé), 1x Halo otočný zásobník
- **504833–HALO Firm nelepivý bez nástrojů:** 2x Univerzální kroužky, 5x 20 ks pevných nelepivých matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 20 ks klínků - malé, střední a velké, 1 Halo otočný zásobník
- **504834–HALO Firm bez nástrojů:** 2x Univerzální kroužky, 5x 25 ks pevných matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 25 ks klínků - malé, střední a velké, 1 Halo otočný zásobník
- **504835–HALO Original Minikit bez nástrojů:** 2x Univerzální kroužky, 4x 5 ks original matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 5 ks klínků - malé, střední a velké, 1 Halo otočný zásobník

Halo™ SYSTÉM SEKČNÍCH MATRIC



Originál Kit s nástroji obj. č. 504831 15 336,-**	17 040,-
HALO Firm bez nástrojů obj. č. 504834 10 377,-**	11 530,-
Original Minikit bez nástrojů obj. č. 504835 6 678,-**	7 420,-
Originál Kit bez nástrojů obj. č. 504832 10 377,-**	11 530,-
Firm kit, nelepivý bez nástrojů 11 530,- obj. č. 504833 10 377,-**	5 990,-*

RETRAKTOR TVÁŘÍ, RTŮ A JAZYKA

Umbrella™

- Přirozeně a jemně pomáhá držet ústa pacienta otevřená bez vytahování či roztahování rtů a namáhání TMJ.
- Chrání jazyk udržuje jazyk pohodlně opřený mimo pracovní oblast.
- Anatomické opěrky dovolují lékaři pracovat v ústech pacienta s maximální viditelností a komfortem pro pacienta.
- Umožňuje výborně odsávat během výkonu, nepřekáží v pracovním poli.
- Nevývolává dávicí reflex u pacientů.
- Při kontrole skusu / otiskování může zůstat v ústech.

Jak zvolit velikost Umbrellu?

- Pokud pacient potřebuje velikost otiskovací lžice 2-3, zvolte Umbrellu Medium.
- Pokud pacient potřebuje velikost otiskovací lžice 4-6, zvolte Umbrellu Large.
- Pokud si neste velikostí jisti, zvolte Umbrellu Large.



5. Zkontrolujte, zda jazyk pacienta pohodlně leží za chráničem, což zajišťuje snadný přístup.



NEPOMÍČTE chránič jazyka na horní stranu jazyka pacienta.

Střední rozvěrač Umbrella, 40 ks obj. č. 505162 2 970,-**	3 300,-
Střední rozvěrač Umbrella, 20 kusů obj. č. 504871 1 584,-**	1 760,-
Střední rozvěrač Umbrella, 5 kusů obj. č. 504870 432,-**	480,-
Velký rozvěrač Umbrella, 40 kusů obj. č. 505258 2 970,-**	3 300,-
Velký rozvěrač Umbrella, 20 kusů obj. č. 505257 1 584,-**	1 760,-
Velký rozvěrač Umbrella, 5 kusů obj. č. 505256 432,-**	480,-



TIP

Bezpečná při
ordinačním bělení,
nesklouzává,
nepřekáží.

IZOLACE PŘI DENTÁLNÍCH VÝKONECH
DermaDam™

- Kofferdam k izolaci, nepudrovaný, vysoce odolný proti protržení.
- DermaDam medium 0,20mm 15x15cm, 36 ks
- DermaDam heavy 0,25mm 15x15cm, 36 ks


 medium - 36 ks | obj. č. 500311 | **1 413,-****
1 570,-

 heavy - 36 ks | obj. č. 500314 | **1 674,-****
1 860,-
TĚSNĚNÍ A TMEL POD KOFFERDAM
OraSeal™

- Efektivně přilne k vlhkému kofferdamu, tkáním, zubům a kovu.
- Přilne i pod vodou a slinami – oprava protrženého kofferdamu při ošetření.
- Chrání před kontaktem gingivy/ orální tkáně s chemikáliemi (peroxid vodíku, kyselina fluorovodíková aj.)


 OraSeal kit | obj. č. 500352 | **1 755,-****
1 950,-

 OraSeal těsnění refill- 4x 1,2 ml | obj. č. 500351 | **1 404,-****
1 560,-

 OraSeal tmel refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500353 | **1 404,-****
1 560,-
Ultradent™ Luer Vacuum Adapter + Capillary Tips

- Odsátí irigantů a debritu.
- Rychle a účinně odsaje iriganty a debritu.
- Šetří čas a snižuje spotřebu papírových čepů.
- Optimální s Capillary Tips – kónickými, pružnými kanylami, s nimiž se dostanete hluboko do kanálku.
- Capillary Tips v průměrech 0,014" (0,35 mm – fialová) a 0,019" (0,48 mm – zelená).


 Luer adaptér - 10 ks | obj. č. 500230 | **891,-****
990,-

 Capillary tips 0,35 mm - 20 ks | obj. č. 500341 | **666,-****
740,-

 Capillary tips 0,35 mm - 50 ks | obj. č. 503099 | **1 422,-****
1 580,-

Kanyly Endo Eze™

- Jednorázové ohebné endodontické kanyly pro endodontické výkony (fixace čepu a dostavby jádra, odsávání vzduchu/vody z kanálku).
- Pružná, pevná jehla se snadno ohne.
- Délka: 19 mm.

Balení:

- 5034xx: 18ga, 19ga, 20ga nebo 22 ga, baleno po 20 ks
- 5014xx: 18ga, 19ga, 20ga nebo 22 ga, baleno po 100 ks


 Endo-Eze kanyly - 20 ks | obj. č. 500345 | **531,-****
590,-

 Endo-Eze kanyly - 100 ks | obj. č. 501430 | **2 277,-****
2 530,-
VÝPLACHOVÁ KANYLA PRO ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ
Endo-Eze Irrigator 27G

- Ohebná kanyla s unikátním zakončením.
- Zajišťuje ideální dosah a současně snižuje riziko vytlačení chemikálií ke stěně kanálku, Snižuje tlak působící přímo na apex.
- Délka 25 mm. Balení po 20 ks.

- Pozn. Kanyly jsou **NESTERILNÍ!**


 Endo-Eze Irrigator 27G - 20 ks | obj. č. 500207 | **576,-****
640,-