

**voco**

# HIGHLIGHTS

**Vysoce výkonný kompozitní materiál**

GrandioSO Unlimited –  
4 mm univerzální kompozit  
v pěti kombinovaných  
odstínech Cluster-Shades

**Zajištění vitality, vhodný pro  
každodenní použití**

Zachování vitality dřeně a překrytí  
dřeně biomateriálem MTA vpt  
(Vital Pulp Therapy)

**Chutný**

Profluorid Varnish+BioMin  
s biosklem je novou  
silou pro zpevnění  
skloviny

**Splní  
všechna přání**

**GrandioSO**  
*Unlimited*

# GrandioSO Unlimited

Univerzální kompozitní materiál do 4 mm v pěti odstínech Cluster Shades

Zatímco se estetické univerzální kompozity musí vrstvit a polymerovat po 2 mm vrstvách, což je komplikované, kompozity typu bulk-fill nabízejí výhodu nanášení do kavity v až 4 mm vrstvách. Vzhledem k jejich nedostatečné estetice se však kompozity typu bulk-fill normálně používají pouze v distálním úseku. VOCO nyní tento problém vyřešilo a přichází s novým univerzálním kompozitem GrandioSO Unlimited. Tento estetický materiál je možné nanášet do kavity v 4 mm vrstvách a je indikován jak pro frontální, tak pro distální úsek. Potřebujete tak již pouze jeden tvarovatelný univerzální kompozit!

## Cluster-Shade-System

Navíc potřebujete mít na skladě pouze 5 odstínů, což je pro vaši každodenní praxi optimální a umožňuje vám výrazně zefektivnit skladové zásoby. Díky zjednodušenému systému odstínů lze všech 16 klasických odstínů VITA® pokrýt pouze 5 kombinovanými odstíny Cluster-Shades:

GrandioSO Unlimited	A1				A2				A3				A3.5				A4			
VITA® classical	A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4				

## Vysoce výkonný a efektivní kompozitní materiál

Díky působivému obsahu plniva 91 % hmotnosti nastavuje GrandioSO Unlimited nová měřítko také z hlediska stability a pevnosti. Nízké objemové smrštění 1,44 % rovněž snižuje riziko vzniku okrajových mezer a okrajových diskolorací, čímž přispívá k dosažení nejvyšší kvality výplně.



## Zkušební balení

10 × 0,3 g Caps  
(2 od každého odstínu:  
A1, A2, A3, A3.5, A4)  
+ 10 × Futurabond U SingleDose,  
+ karta s odstíny

REF 6257

2.080 Kč ~~2.610 Kč \*\*~~

## Sada stříkaček

5 × 4,5 g stříkačka  
(A1, A2, A3, A3.5, A4)  
+ karta s odstíny

REF 6258

11.200 Kč ~~14.000 Kč \*\*~~

## Sada Caps

75 × 0,3 g Caps  
(15 od každého odstínu:  
A1, A2, A3, A3.5, A4)  
+ karta s odstíny

REF 6270

11.200 Kč ~~14.000 Kč \*\*~~

Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na [www.voco.dental](http://www.voco.dental)

Vysoce výkonný a efektivní kompozit

- Univerzální**  
Pro frontální i distální úsek chrupu
- Maximální stabilita a pevnost**  
Obsah plniva 91 %
- 5 kombinovaných odstínů Cluster-Shades**  
Pokrýtí všech 16 odstínů VITA®
- Bez vrstvení**  
Vrstvy silné až 4 mm
- Vynikající estetika**  
Skvělá leštitelnost

# MTA vpt

Zachování vitality dřeně v každodenní praxi –  
biokompatibilní a bez monomerů

Biokompatibilní, stabilní a vůči bakteriím odolná ochrana zubní dřeně je nezbytná pro zachování její vitality. S MTA vpt nabízí společnost VOCO minerální trioxidový agregát (MTA), který je navržen právě pro tento účel. V rámci vitální pulpoterapie (VPT) lze MTA vpt použít k podkládání výplní, nepřímému a přímému krytí i k ošetření zubní dřeně po vitální amputaci (částečné nebo úplné pulpotomii). V rámci ošetření zubního kazu lze pomocí MTA vpt spolehlivě překryt i zbytky kariézního dentinu.

MTA vpt uvolňuje během tuhnutí ionty vápníku a hydroxidu, které stimulují tělu vlastní regenerační procesy a tvorbu terciárního dentinu. Výsledné vysoké pH je známé svým bakteriostatickým účinkem a podporuje remineralizaci. MTA vpt tak vytváří stabilní a vůči bakteriím odolnou ochrannou bariéru – optimální základ pro zachování vitality dřeně.

- MTA pro každodenní klinické použití – biokompatibilní, bez monomerů
- Vysoká hodnota pH (12) - známá svým bakteriostatickým účinkem
- Uvolňování iontů vápníku a hydroxidu – podporuje tvorbu terciárního dentinu a remineralizaci
- Spolehlivá ochrana zubní dřeně – mineralizuje a vytváří utěsnění odolné vůči bakteriím
- Časově efektivní – okamžité další zpracování díky vrstvení bez vzniku tlaku
- Snadná manipulace – nanášení standardními nástroji nebo přímo z kapsle
- Žádné diskolorace související s produktem – neobsahuje oxid bismutu a sloučeniny obsahující železo
- Rentgen kontrastní (290 % Al)



## MTA vpt

Ruční míchání  
10 g prášek + 10 ml tekutina

REF 1645

5.180 Kč

## MTA vpt AC

25 ks aplikační kapsle

REF 1646

5.620 Kč



## Cenově atraktivní materiál MTA pro vaši každodenní praxi

Podkládací cement pro  
všechny výplňové materiály

Nepřímé  
překrytí zubní dřeně

Přímé  
překrytí zubní dřeně

Ošetření zubní dřeně po  
vitální amputaci





## Bifix Temp fluorescent

Duálně tuhnoucí provizorní  
upevňovací materiál na kompozitní bázi

Díky svému translucenčnímu odstínu, podobnému zubu, Bifix Temp fluorescent harmonicky splyne s provizorní náhradou. Estetika zůstává v přirozeném světle nezměněna a ani pod UV-A světlem fluorescence neprosvítá skrz provizorní náhradu. Pod UV-A světlem materiál velmi intenzivně fluoreskuje, což usnadňuje rozpoznání a odstranění nejmenších zbytků materiálu po odstranění provizorní náhrady a napomáhá přesnému umístění následné definitivní náhrady. Už jen tato výhoda zefektivňuje obvyklý časově náročný proces dokončování.



### Bifix Temp fluorescent

5 ml QuickMix stříkačka  
+ příslušenství

REF 1056

1.750 Kč

## AlignerFlow LC

Fluorescentní kompozit pro attachmenty alignerů

Léčba pomocí alignerů je běžnou součástí nabídky stomatologických a ortodontických ordinací, přičemž v některých případech hrají významnou roli attachmenty. Pro výrobu přesně vytvarovaných attachmentů pro alignery jsou zapotřebí speciální kompozity. S materiálem AlignerFlow LC vám VOCO nabízí nanohybridní kompozit s efektem fluorescence, navržený speciálně pro tyto účely. Pod UV-A světlem je možné zkontrolovat attachmenty nebo odhalit případné zbytky materiálu po odstranění attachmentů a ten pak šetrně odstranit ze skloviny.



### AlignerFlow LC

2 × 2 g stříkačka A1

REF 1526

2 × 2 g stříkačka A2

REF 1527

2 × 2 g stříkačka A3

REF 1528

2.550 Kč

### Přehled výhod

- Přesné použití s dokonalou zatékavostí
- Vytvrzování světlem skrz průhlednou šablonu
- Stabilní a odolný vůči abrazi po celou dobu trvání léčby





## Clip F fluorescent

Světlem tuhnoucí výplňový materiál  
na provizorní výplně

Clip F fluorescent zaujme svojí všestranností a uživatelskou přívětivostí. Tento jednosložkový materiál se snadno nanáší a tvaruje. Díky vytvrzování světlem je Clip F fluorescent okamžitě zatížitelný a odolný vůči slinám. Elasticnost materiálu umožňuje ve většině případů odstranění přebytků beze zbytku a okraje preparace zanechává čisté a nepoškozené. Pod UV-A světlem je podstatně snazší dobře vidět a odstranit i malé přebytky a zbytky materiálu: zejména v případě tenkých vrstev, které nejsou pouhým okem dobře viditelné. Clip F fluorescent je vhodný pro všechny typy provizorních výplní, uzávěrů a rekonstrukcí, včetně techniky zhotovování onlejí/inlejí.



### Clip F fluorescent

2 × 4 g stříkačka

REF 1288

1.820 Kč

## Rebilda DC fluorescent

První systém na zhotovování kořenových nástaveb  
a upevňování čepů s aktivovatelnou fluorescencí

S duálně tuhoucím systémem na bázi kompozitu Rebilda DC fluorescent na zhotovování kořenových nástaveb a upevňování čepů přináší společnost VOCO na trh nového člena rodiny Rebilda. Produkty Rebilda jsou již desítky let úspěšně používány po celém světě a ve stomatologických ordinacích se těší velké důvěře, především pro své vlastnosti podobné dentinu. Ke stávajícímu dentinovému, bílému a modrému odstínu nyní přibyla fluorescentní verze, která opět dokazuje schopnost společnosti VOCO inovovat svoji nabídku.



Kartuš 50 g,  
fluorescentní dentin,  
+ příslušenství

REF 1399

6.000 Kč

Stříkačka QuickMix 10 g  
fluorescentní dentin,  
+ příslušenství

REF 1406

2.570 Kč

### Je fluorescentní pod UV-A světlem

Skvělá viditelnost přebytečného materiálu a okrajů nástavby, a to i v hlubokých subgingiválních úrovních

### Snadná manipulace


Opracovává se stejně jako dentin, Zatékavá konzistence – dokonalá adaptace

### Vynikající estetika

Pod přirozeným světlem v barvě dentinu, a tedy ideálně vhodný pro vysoce estetické rekonstrukce

### Duální tuhnutí

Použitelný v kořenovém kanálku k upevnění kořenových čepů (např. Rebilda Post)

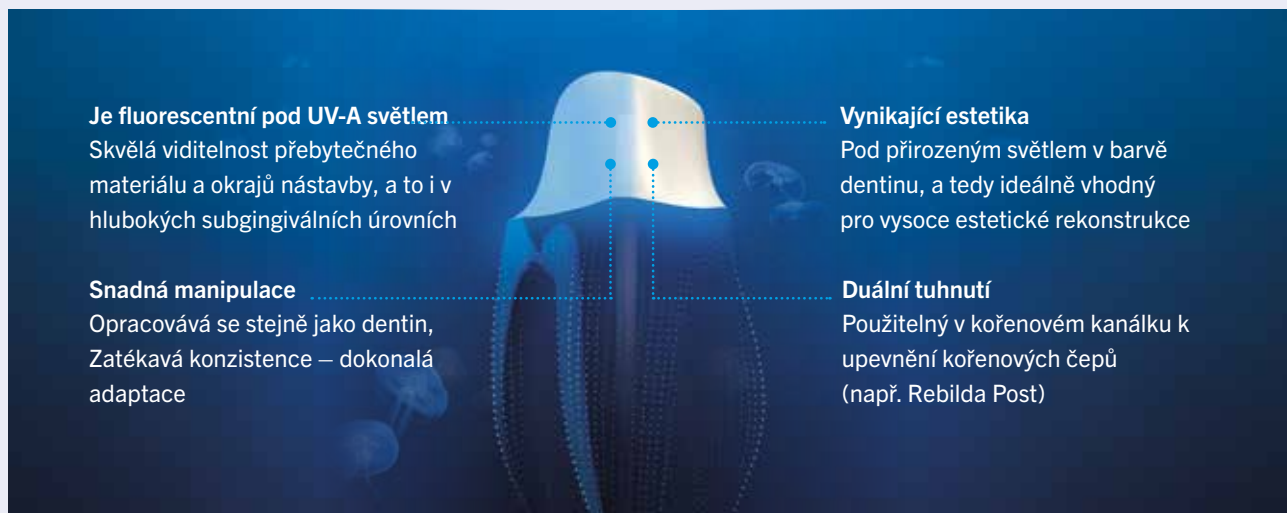

# Profluorid Varnish + BioMin

Podstatně zpevňuje oslabenou sklovinu –  
ve čtyřech příjemných příchutích

Osvědčený fluoridový lak VOCO Profluorid Varnish obsahuje navíc biosklo BioMin. Toto neviditelné biosklo se za přítomnosti slin rozpouští a uvolňuje ionty vápníku a fosfátu, které napomáhají remineralizaci zubu. Spolu s fluoridy z laku se na povrchu zubu vytvářejí krystalické struktury, které mimo jiné výrazně zpevňují kyselinami oslabenou sklovinu.

Spolu s dobře známou desenzibilizací je to skutečná dvojitá ochrana!

Ušetříte  
**25%\***

**200 × 0,40 ml SingleDose**

Karamel REF 2276  
Třešeň REF 2277  
Máta REF 2278  
Žvýkačka REF 2279

11.730 Kč ~~15.640 Kč\*\*~~

**50 × 0,40 ml SingleDose**

Karamel REF 2270  
Třešeň REF 2271  
Máta REF 2272  
Žvýkačka REF 2273

3.910 Kč

**10 ml Tuba**

Karamel REF 2266  
Třešeň REF 2267  
Máta REF 2268  
Žvýkačka REF 2269

1.110 Kč

**Mixed Flavour**

48 × 0,40 ml SingleDose  
s příchutí: karamel, třešeň,  
máta, žvýkačka

REF 2274

3.910 Kč



## Profluorid Varnish

Lak pro desenzibilizaci zubů obsahující fluoridy (5 % NaF)

Hypersenzitivita je způsobena především obnaženými dentinovými kanálky. Cílem léčby je proto tyto kanálky uzavřít. Profluorid Varnish je lak s obsahem fluoridu, který účinně uzavírá dentinové kanálky u obnažených zubních krčků nebo po preparaci kavity.

### Přehled výhod

- Rychlá desenzibilizace a uvolňování fluoridu (22.600 ppm fluoridu)
- Snadno se nanáší – tolerantní vůči vlhkosti
- K dostání v sedmi příjemných příchutích
- Úsporné nanášení v tenkých vrstvách, s vysokým účinkem

Ušetříte  
**25%\***



**10 ml Tuba**

Meloun REF 1267 Karamel REF 2232  
Máta REF 2234 Třešeň REF 2233  
Pina Colada REF 2237 Cola s limetkou REF 2236

970 Kč

**200 × 0,40 ml SingleDose**

Meloun REF 1271 Žvýkačka REF 2239  
Máta REF 2231 Třešeň REF 2230  
Pina Colada REF 2243 Cola s limetkou REF 2241  
Karamel REF 2229

10.200 Kč ~~13.600 Kč\*\*~~

**Mixed Flavour**

4 × 10 ml Tuba  
s příchutí: máta, meloun,  
třešeň a karamel

REF 2971

2.910 Kč ~~3.880 Kč\*\*~~

# Futurabond U

V praktickém balení *SingleDose*

Na pozadí Futurabond U stojí rozsáhlý proces výzkumu a vývoje, který měl na paměti jediný cíl: nabídnout univerzální adhezivum, které by poskytovalo lékařům pouze výhody a spolehlivost, a v zubní ordinaci zcela eliminovalo nutnost použití jakýchkoli jiných adhezivních systémů.

Futurabond U nastavuje nové standardy z hlediska vazebné pevnosti a zejména pak flexibility a univerzálnosti použití.

## 50 *SingleDose*

50 × Futurabond U  
+ příslušenství

REF 1571

3.730 Kč

## 200 *SingleDose*

200 × Futurabond U  
+ příslušenství

REF 1572

13.030 Kč ~~14.920 Kč~~ \*\*


Ušetříte  
**12%\***



# Grandio blocs & Grandio disc

Nanokeramický hybridní CAD / CAM materiál  
na definitivní náhrady

Bločky a disky Grandio zaujmou svými fyzikálními vlastnostmi, pokud jde o elasticitu, pevnost a vysoký obsah plniva 86 % hmotnosti. Materiál se tak blíží přirozenému zubu více než jakýkoli jiný materiál pro nepřímé náhrady. Bločky/disky Grandio jsou materiálem volby a předčí konvenční keramiku. Zhotovované výrobky lze snadno intraorálně dokončit a vyleštit do vysokého lesku.

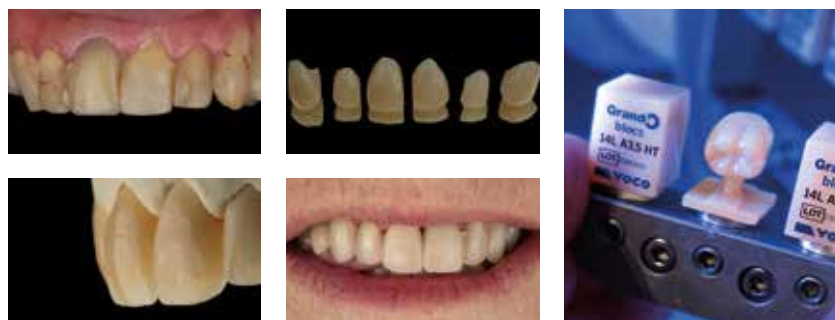

Zdroj: Dr. Felipe Moura, Brazílie

	Pro frontální úsek							Pro distální úsek			
	A1 LT	A2 LT	A3 LT	A3.5 LT	B1 LT	C2 LT	BL LT	A1 HT	A2 HT	A3 HT	A3.5 HT
no. 12	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6012	6013	6014	6015
no. 14L	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6027	6028	6029	6030



**NOVINKA**

## Grandio disc multicolor

1 × 12 mm (ø 98 mm)

Například:

A2 REF 6249

A3 REF 6250

11.570 Kč

Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na [www.voco.dental](http://www.voco.dental)

Dostupné také pro Planmill®



## Grandio blocs

5 × no. 12 LT/HT

Viz tabulka REF

3.530 Kč

## Grandio blocs

5 × no. 14L LT/HT

Viz tabulka REF

3.800 Kč

# Bifix Veneer LC




Bezpečné a estetické – upevňování fazet pomocí optimalizovaného pracovního postupu

Obzvláště estetický světle tuhnucí nano-hybridní upevňovací kompozit Bifix Veneer LC s 81% hmotností plniva byl vyvinut speciálně pro jednoduché a bezpečné adhezivní upevňování translucenčních fazet, inlejí a onlejí z kompozitních nebo keramických materiálů.

Důmyslná koncepce odstínů se **třemi odstíny bright, clear a warm** usnadňuje umístění fazet a přináší pozitivní efekt na estetický výsledek. Díky přesně uzpůsobeným zkušebním pastám je výběr správného odstínu jednoduchý a konečný výsledek je možné předem zkontrolovat.

**Intuitivní a efektivní koncepce odstínů pro maximální estetický úspěch**

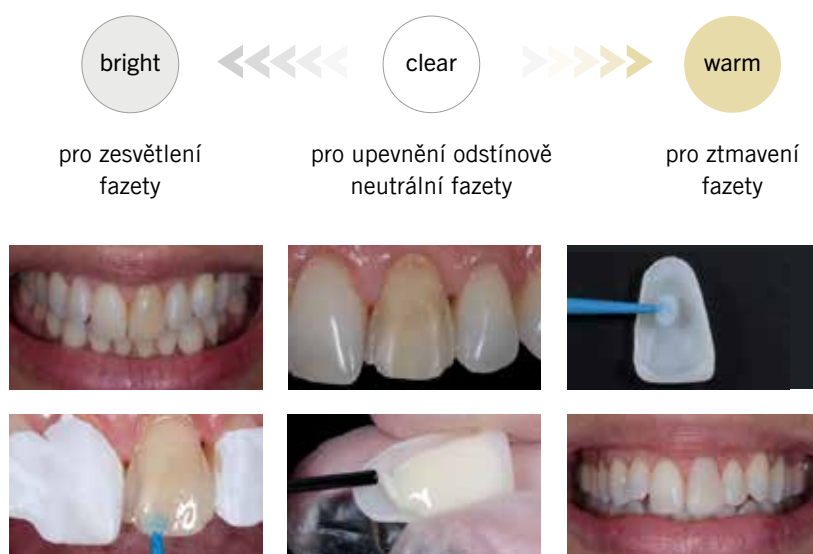

Zdroj: Prof. Carlos Torres, Brazílie

Pro objednání produktů z akčního letáku **VOCO AKCE**, prosím, kontaktujte svého dodavatele **VOCO** nebo své dentální depo.

\*Ve srovnání se zakoupením jednoho balení \*\*Celková cena za jednotku

Nabídky platí pouze pro spolupracující maloobchodní partnery. Vždy jsou brány v úvahu ceny nabízené Vaším dentálním depem. Uvedené ceny jsou doporučenými prodejními cenami včetně DPH. Právo na chyby a opomenutí vyhrazeno. Výrobce nenesse odpovědnost za tiskové chyby.



Ušetříte  
**20%\***

## Sada Bifix Veneer

3 × 2 g stříkačka Bifix Veneer LC  
3 × 2,5 g stříkačka Bifix Veneer Try-In  
(bright, clear, warm)  
+ příslušenství

REF 1428

5.150 Kč ~~6.430 Kč\*\*~~

## Sada Bifix Veneer System

3 × 2 g stříkačka Bifix Veneer LC  
3 × 2,5 g stříkačka Bifix Veneer Try-In  
(bright, clear, warm)  
2 ml stříkačka Vococid  
20 ks SingleDose Futurabond U  
20 ks SingleDose Ceramic Bond  
10 ks Sticky Tim  
+ příslušenství

REF 1429

8.070 Kč ~~10.200 Kč\*\*~~

Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na [www.voco.dental](http://www.voco.dental)

## VOCO GmbH

Anton-Flettner-Straße 1-3  
27472 Cuxhaven  
Německo



[voco.dental](http://voco.dental)