

## OptiDisc™

*Disky pro dokončování a leštění*


### Skonči tak dobře, jako jsi začal!

Úspěšná obnova zubu je stejně tak o dobrém začátku jako o dobrém dokončování a leštění. Dokončovací a lešticí disky OptiDisc umožňují dosáhnout konečného výsledku, který se vyrovná výsledku přirozeného chrupu, a nyní je jejich výběr ještě snazší.

- **FLEXIBILNÍ A PŘESNÉ**
- **4 BARVY, 4 STUPNĚ HRUBOSTI**
- **BEZPEČNÉ**
- **PŘIPRAVENÉ IHNEDE K POUŽITÍ A ODOLNÉ**

## FLEXIBILNÍ A PŘESNÉ


Díky kratšímu mandrelu a možnosti ohýbání disku dosáhnete do distální oblasti a dalších hůře přístupných oblastí bez omezení. Transparentní materiál poskytuje skvělou viditelnost při práci a zároveň lepší přesnost při dokončování a leštění.

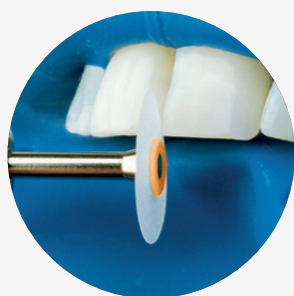


Přesný




Flexibilní

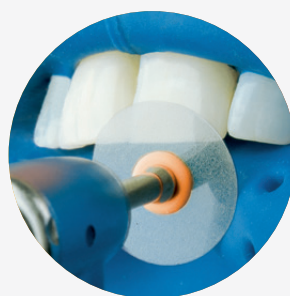

Transparentní

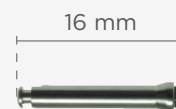


KRÁTKÝ

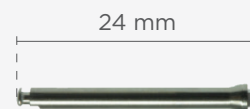


STANDARDNÍ

## PŘIPRAVENÉ IHNED K POUŽITÍ A ODOLNÉ


OptiDisc disky jsou vyrobeny z polyesteru potažené vrstvou částic oxidu hlinitého. Brusné částice nemají vnější vrstvu, což znamená, že můžete pracovat ihned po nasazení disku na mandrel.

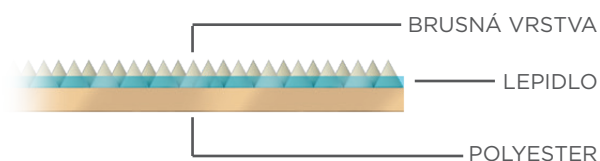


### Kerr OptiDisc®

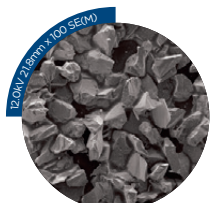


Extra hrubý

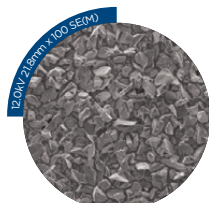

Hrubý/Střední

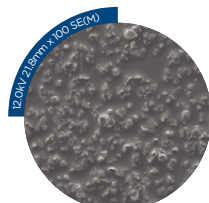


Jemný

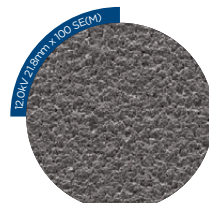


Extra jemný


### Konkurenční disk

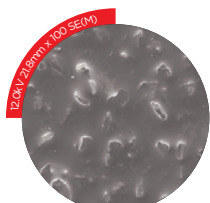


Extra hrubý

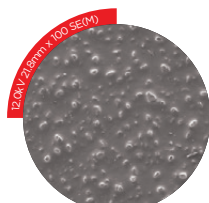

Hrubý/Střední

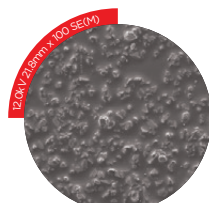

Jemný

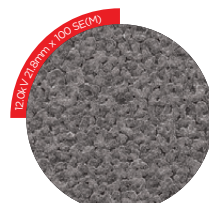

Extra jemný

SEM obrázky ukazují srovnání abrazivního povrchu konkurenčních materiálů.

SEM obrázky jsou použité s laskavým svolením Dr. Jeana Salomona, Francie.

## BEZPEČNÉ


Aktivní strana disku OptiDisc je snadno rozpoznatelná a patentovaný terčík se uzamkne pod povrchem disku, čímž chrání výplně před poškozením a poškrábáním. Je také zaručena optimální přesnost točivého momentu, takže disk neklouže a neotáčí se, což vám zajistí lepší a bezpečnější manipulaci.



Aktivní strana



Neaktivní strana

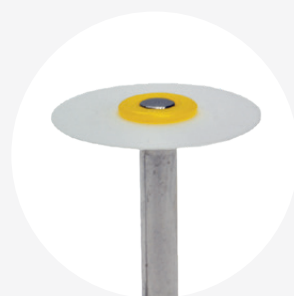


OptiDisc



Konkurenční disk

## 4 BARVY, 4 STUPNĚ HRUBOSTI

System OptiDisc nabízí výběr ze čtyř stupňů hrubosti disků pro konturování, dokončování, leštění a leštění do vysokého lesku. Je vhodný pro kompozity, skloionomery, amalgámy, polodrahokamy a drahé kovy. Disky jsou k dispozici také ve třech různých velikostech průměru v závislosti na vaší potřebě: 9,6 mm, 12,6 mm a 15,9 mm.

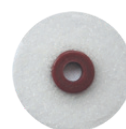

15.9mm




12.6mm



9.6mm


Extra hrubý - KONTUROVÁNÍ

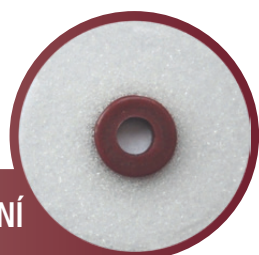

Hrubý/Střední - DOKONČOVÁNÍ



Jemný - LEŠTĚNÍ

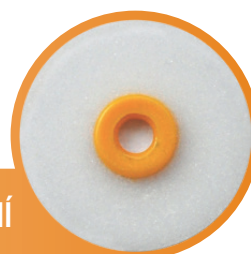









Extra jemný - LEŠTĚNÍ DO VYSOKÉHO LESKU



Barevně odlišené disky vám pomohou snadno určit požadovanou hrubost jasně a zřetelně.

# LEŠTÍCÍ A DOKONČOVACÍ DISKY PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY

Typ disku	Indikace	Povrchy zubů ve frontální oblasti	Povrchy zubů v distální oblasti	Inter- proximální oblast
Extra hrubý	<b>HRUBÉ SNÍŽENÍ A KONTUROVÁNÍ</b> Úprava primárního geometrického tvaru.			
Hrubý/Střední	<b>DOKONČOVÁNÍ</b> Odstranění přebytku kompozitu, vytváření okluzní anatomie, lingválních fisur a sekundární anatomie.			
Jemný	<b>LEŠTĚNÍ</b> K vyhlazení nerovností na povrchu a ke snížení drsnosti povrchu pod Ra = 0,35 µm.			
Extra jemný	<b>LEŠTĚNÍ DO VYSOKÉHO LESKU</b> Snížení drsnosti povrchu do vysokého lesku pod Ra = 0,2 µm.			

## OptiDisc General Assorted Kit

**4200** OptiDisc General Assorted Kit - 9.6mm, 12.6mm (240 ks)

Obsah: 120x ø 9.6mm sada OptiDisc [30x Extra hrubý; 30x Hrubý; 30x Jemný, 30x Extra jemný]; 120x ø 12.6mm sada OptiDisc [30x Extra hrubý; 30x Hrubý; 30x Jemný, 30x Extra jemný]; 3x Standardní Mandrel; 2x Krátký Mandrels; 1x OptiShine.

## OptiDisc Assorted Kit

**4190** OptiDisc Assorted kit 15.9mm (80 ks)

Obsah: ø 15.9mm: 20/Extra hrubý, 20/Hrubý, 20/Jemný, 20/Extra jemný.

## OptiDisc Mini Kit

**4188** OptiDisc Mini Kit 12.6mm (120 ks)

Obsah: ø 12.6mm: 30/Extra hrubý, 30/Hrubý, 30/Jemný, 30/Extra jemný, 1 Standardní Mandrel, 1 Krátký Mandrel, 1 OptiShine.

## OptiDisc Refills

**4197** 80x OptiDisc - 9.6mm - Extra hrubý  
**4181** 100x OptiDisc - 9.6mm - Hrubý/Medium  
**4182** 100x OptiDisc - 9.6mm - Jemný  
**4183** 100x OptiDisc - 9.6mm - Extra jemný  
**4198** 80x OptiDisc - 12.6mm - Extra hrubý  
**4184** 100x OptiDisc - 12.6mm - Hrubý/Medium  
**4185** 100x OptiDisc - 12.6mm - Jemný  
**4186** 100x OptiDisc - 12.6mm - Extra jemný  
**4199** 80x OptiDisc - 15.9mm - Extra hrubý  
**4192** 100x OptiDisc - 15.9mm - Jemný  
**4193** 100x OptiDisc - 15.9mm - Extra jemný  
**195** 5x OptiDisc Standardní Mandrel  
**196** 5x OptiDisc Krátký Mandrel