

**Výběr
odstínu
se náhle
zjednodušil.**

3M™ Filtek™ Easy Match Univerzální kompozit

- ▶ Intuitivní výběr odstínu
- ▶ Přirozeně adaptivní opacita
- ▶ Nižší skladové zásoby



3M™ Filtek™ Easy Match Univerzální kompozit

Bright. Natural. Warm.

Pouhé 3 odstíny přinášejí
perfektní sladění úsměvu
téměř každého pacienta

Co můžete očekávat:

- ▶ Jednodušší postup při
jednodstínových rekonstrukcích
- ▶ Přirozeně vypadající výsledky
- ▶ Zjednodušený systém postavený
na klinicky ověřené
nanotechnologii
- ▶ Rychlý a intuitivní výběr
odstínu při frontálních
a distálních rekonstrukcích

Ulehčete si výběr odstínu. Jednoduše. Intuitivně.

- ☒ Pouhé 3 odstíny: Bright, Natural, Warm
- ☒ Žádné komplikované barevné klíče
- ☒ Není potřeba opákní materiál
na blokování světla

Jednoduchost bez kompromisu.

Některé zjednodušené systémy odstínů přinášejí nevýhody
v estetice. Kompozit Filtek Easy Match Universal však přináší
nejen jednoduchý výběr odstínů, ale také perfektní splynutí
s okolními tkáněmi pro přirozeně vypadající úsměvy.



„3M™ Filtek™ Easy Match Universal nabízí
velmi dobrý handling a líbí se mi
i konzistence materiálu při aplikaci.
Estetika dokončené práce je vynikající
a přizpůsobení odstínů je skvělé jak
ve frontálním, tak i v distálním úseku.”

Dr. Kunal Shah
Hendon, Velká Británie


Výběr odstínu je intuitivní a přímý.

Sytost, neboli intenzita barvy, je jen jedním z faktorů, který vede k vynikající shodě odstínů. I když má kompozit „správnou barvu“ může se lišit od okolní dentice pokud jeho **jas** (relativní světlost/ tmavost) anebo **opacita** také nejsou vhodně sladěny.


3 odstíny kompozitu 3M™ Filtek™ Easy Match pokrývají všechny odstíny VITA Classical - není potřeba žádný opákní materiál na blokování průniku světla.

“Nemohu být spokojenější se schopností kompozitu 3M™ Filtek™ Easy Match, který splyne s okolní tkání. Výběr odstínu je nyní jednodušší jako nikdy předtím. Handling mi velmi dobře sedí a pěkného lesku se dá dosáhnout jen s použitím ověřeného lešticího systému Sof-Lex.”


Dr Nik Arolker
Derby, UK

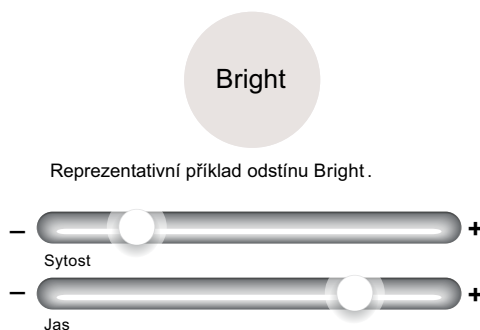

Bright: nízká sytost, vysoký jas

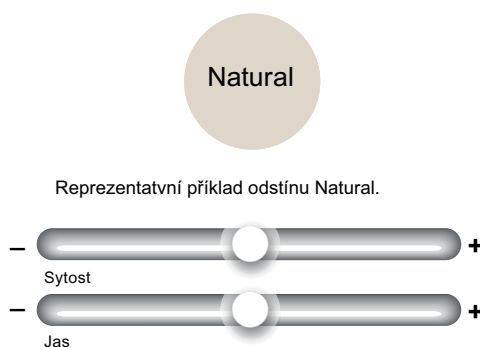


Natural: vyvážená, střední sytost a jas

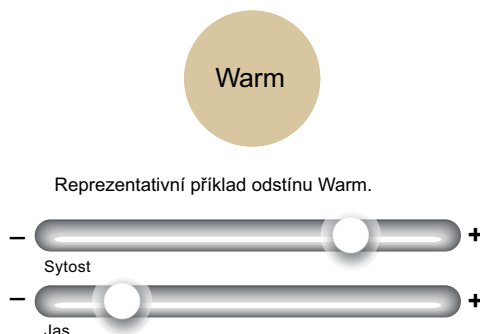

Warm: vysoká sytost, nízký jas

Základní výhody, které si zamilujete

- Vynikající shoda odstínu u většiny anteriorních a posteriorních rekonstrukcí
- Rychlý, jednoduchý a intuitivní výběr odstínu bez ztráty opacity
- Zjednodušené jednoodstínové rekonstrukce, kde není potřeba žádný opaker na blokování průniku světla
- Zjednodušený systém správy zásob redukuje plýtvání u málo používaných odstínů
- Vhodné k nahřívání, které snižuje sílu potřebnou pro vytlačení¹ bez změny fyzikálních vlastností²

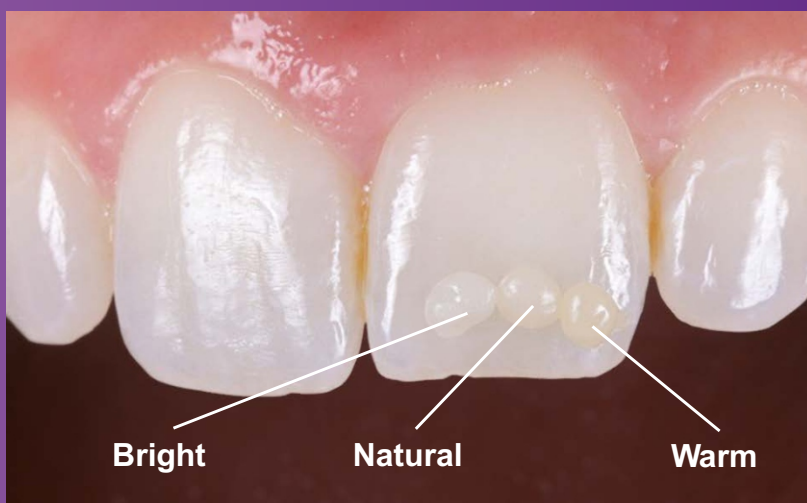

S laskavým dovolením Dr. Briana Baliwasa

1. Interní data.


2. Pokud je nahříváno podle návodu na použití (kapsle: max. 70°C do 1 hodiny).

Jak to funguje?

Se silou přirozeně adaptivní opacity.


Na rozdíl od jiných jednodstínových systémů, kompozit 3M™ Filtek™ Easy Match nepotřebuje maskovací materiál na překrytí tmavých míst při anteriorních rekonstrukcích. Jeho přirozeně adaptivní opacita zabezpečuje translucenci podobnou sklovině v tloušťce 0,5 - 1 mm a to přesně tam, kde ji potřebujete při zešikmení a incizálních hranách. Při tloušťce větší než 2 mm má všude jinde opacitu podobnou dentinu.

Všechny kompozity jsou více translucenční, pokud jsou aplikované v tenších vrstvách. Přirozeně adaptivní opacita kompozitu Filtek Easy Match optimálně napodobuje dentin i sklovinu, což mu napomáhá splynout s okolními zubními tkáněmi a zabezpečuje přirozený vzhled.

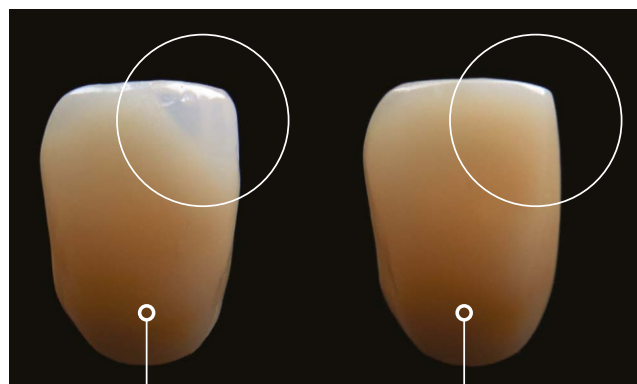

Výrobce A
jeden odstín
(bez použití opákního
maskovacího materiálu)

3M™ Filtek™ Easy Match
univerzální kompozit odstín
Natural (bez použití
opákního maskovacího
materiálu)

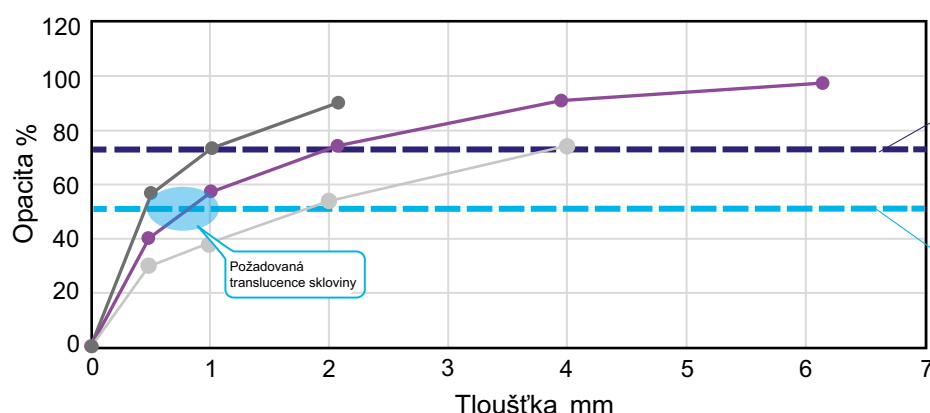

Jas dentin
3M™ Filtek™ Easy Match má
opacitu dentinu
v tloušťce ≥ 2mm

Jas sklovina
3M™ Filtek™ Easy Match má
translucenci skloviny
v tloušťce 0.5–1mm

Zdroj: Interní data 3M


— 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Restorative A2-D — Výrobce A - jeden odstín (bez maskovacího opákního materiálu)
— 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative

Bližší pohled na SKUTEČNOU nanotechnologii

Kompozit Filtek™ Easy Match má stejnou SKUTEČNOU technologii nanočástic plniva jako ostatní prémiové kompozitní materiály Filtek™. Unikátní shluky nanočástic zabezpečují excelentní odolnost vůči opotřebení a pomáhají udržovat vysoký lesk.



3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative
shluk nanočástic
zvětšení 100.000x

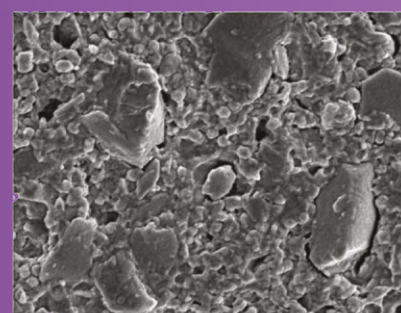

Kompozit jiného výrobce

SEM obrázky s laskavým dovolením Dr. J. Perdigao, University of Minnesota.

Součást rodiny dentálních materiálů 3M™ Filtek™

Budování důvěry
už více jak 50 let.

2 miliardy rekonstrukcí
– a přibývají další.

Kompozita 3M™ Filtek™ postavené na naší SKUTEČNÉ nanotechnologii pomohli zubním lékařům při zhotovení 2 miliard rekonstrukcí. Rodina Filtek™ Vám dává možnosti, které potřebujete pro všechny klinické situace: od anteriorních po posteriórní rekonstrukce, od prémiové estetiky po časově úsporné řešení a vše mezi tím. Bez ohledu na to, či potřebujete univerzální, flow anebo bulk-fill kompozit v předním anebo zadním úseku, rodina Filtek™ Vám vždy nabídne estetické a efektivní řešení.



“Kompozit 3M™ Filtek™ Easy Match předčil moje očekávání. Jeho schopnost barevně splynout je pozoruhodná. Jen se 3 odstíny mohou napodobit prakticky každý existující odstín, díky čemuž je proces výběru barvy neuvěřitelně jednoduchý.”

Dr. P. Monteiro
Instituto Universitário Egas Moniz, Taliansko



Vynikající
leštitelnost



Excelentní pevnost
a odolnost vůči
opotřebení



Dobrý
handling



Vhodný na nahřívání
a injekční techniku¹

1. Nahřívání kapslí: max. 70°C po dobu max. 1 hodiny



3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative – Bright

Obj. č. Popis produktu

6310B 20 kapslí á 0,20g

6320B 1 stříkačka á 4g



3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative – Natural

Obj. č. Popis produktu

6310N 20 kapslí á 0.20g

6320N 1 stříkačka á 4g



3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative – Warm

Obj. č. Popis produktu

6310W 20 kapslí á 0.20g

6320W 1 stříkačka á 4g

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative – Úvodní sada

Obj. č. Popis produktu

6310K 60 kapslí á 0,20g: po 20 kapslích Bright, Natural a Warm

6320K 3 stříkačky á 4g: 1 stříkačka z odstínu Bright, Natural a Warm

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative – Výhodné balení

Obj. č. Popis produktu

6310 100 kapslí á 0.20g: Pouze odstín Natural

6320 5 stříkaček á 4g: Pouze odstín Natural



<https://www.solventum.com/en-us/home/oral-care/dental-solutions/direct-procedure/>

Záruka: Společnost 3M zaručuje, že tento výrobek bude v době nákupu bez vad materiálu a vad z výroby. 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNÍ ÚČEL. Použivatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro jeho použití. Pokud je tento výrobek po dobu záruční doby vadný, vaší jedinou náhradou a jedinou povinností společnosti 3M bude oprava anebo výměna výrobku 3M.

Omezení odpovědnosti: S výjimkou případů, kde to zákon zakazuje, společnost 3M nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vyplývající z tohoto výrobku, ať už přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné anebo následné, bez ohledu na tvrzení teorie, včetně záruky, smlouvy, nedbalosti anebo objektivní odpovědnosti.

 solventum | Authorized Distributor

* Zdroj: Interní data 3M.

Lot #098E53, #002EY8; Filtek™ Easy Match Universal Restorative Lot #9533695, #NE57998.

©Solventum 2024. Solventum, logo S a Filtek jsou ochranné známky společnosti Solventum anebo jejich přidružených společností. 3M a 3M logo jsou ochranné známky 3M.

Ostatní použité ochranné známky jsou vlastnictvím jiných společností.